
Operating manual
Bedienungsanleitung
Mode d'emploi
Instrucciones de operación

ba52313edfs

pH/Cond 340i

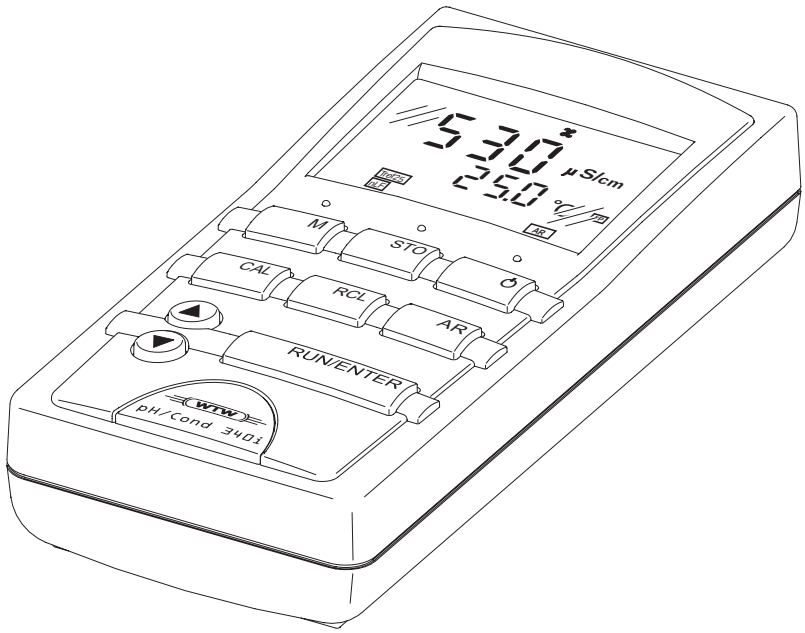

pH/Conductivity Pocket Meter	Page	3
pH/Leitfähigkeits-Taschenmeßgerät	Seite	17
pH/Conductimètre de poche	Page	31
Medidor manual pH/conductividad	Página	45

Note to this operating manual

This operating manual contains a description of

- all basic functions,
- all instructions for a safe operation, and
- all technical data in a compact form.

A more detailed description with notes for special applications is available as a pdf document via internet under http://www.WTW.com.

Hinweise zu dieser Bedienungs-anleitung

Diese Bedienungsanleitung enthält in kompakter Form

- die Beschreibung aller Grundfunktionen,
- alle Hinweise für den sicheren Betrieb und
- alle technischen Daten.

Eine ausführlichere Beschreibung mit Hinweisen für besondere Anwendungen ist als pdf-Dokument im Internet unter http://www.WTW.com erhältlich.

Remarque à ce mode d'emploi

Ce mode d'emploi contient sous forme compacte

- la description de toutes les fonctions de base et
- toutes les informations assurant un fonctionnement sûr, ainsi que
- tous les données techniques.

Une description plus étendue contenant les informations sur des emplois spéciaux peut être obtenue sous forme pdf dans l'internet sous http://www.WTW.com.

Observatión a estas instrucciones

Este manual de instrucciones incluye la descripción en forma resumida de

- todas las funciones básicas,
- todas las observaciones que le garantizan el
- funcionamiento normal y seguro, asimismo todo las especificaciones y datos técnicos.

En el internet, bajo http://www.WTW.com encuentra Ud. una descripción más detallada, en formato pdf, para aplicaciones especiales.

Copyright © Weilheim 2004, WTW GmbH

pH/Cond 340i - List of contents

Safety 4
Display and jack field 4
Mains power 5
Switching on the measuring instrument 5
Measuring 6
pH calibration 7
Conductivity: Determining the cell constants 10
Saving data 11
Outputting the data memory 11
Transmitting data 11
Configuring 12
Resetting to default settings 13
Technical data 14

Safety


Safety instructions

The individual chapter of this operating manual use the following safety instruction to indicate various types of danger:


Warning
indicates instructions that must be followed precisely in order to avoid the possibility of slight injuries or damage to the instrument or the environment.

Display and jack field

Display

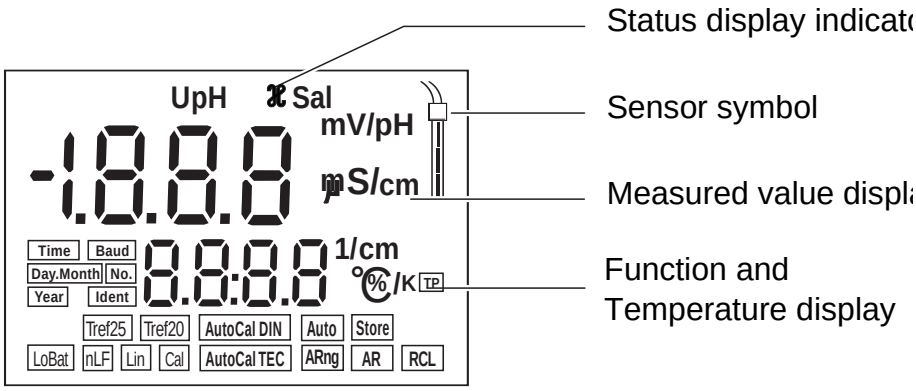

Jack field

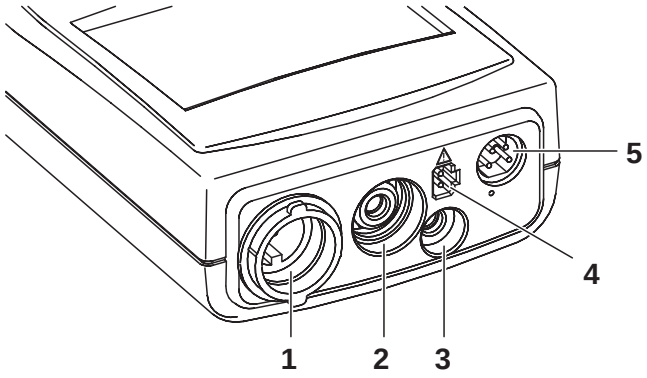

1 Conductivity measuring cell
2 pH electrode
3 pH temperature sensor
4 Plug-in power supply unit
5 RS232 serial interface

Warning
Only connect sensors to the measuring instrument that cannot return any voltages or currents that are not allowed (> SELV and > current circuit with current limiting). Almost all sensors - in particular WTW sensors - fulfill these conditions.

Mains power


You can either operate the measuring instrument with batteries or with the plug-in power supply. The plug-in power supply provides the measuring instrument with low voltage (7.5 V ... 12 V DC). This saves the batteries.



Warning
The line voltage at the operating site must lie within the input voltage range of the original plug-in power supply (see TECHNICAL DATA).



Warning
Only use original plug-in power supplies (see TECHNICAL DATA).

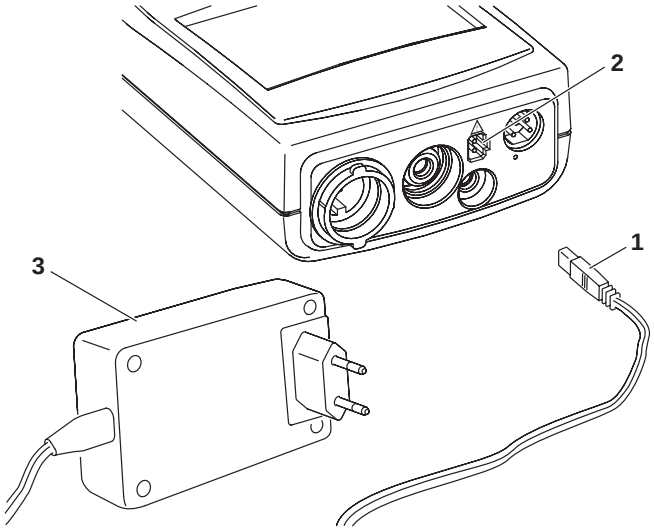

- Plug the jack (1) into the socket (2) of the measuring instrument.
- Connect the original WTW plug-in power supply (3) to an easily accessible mains socket.

Switching on the measuring instrument


- Press the **<** ⏻ **>** key.
  Display test appears briefly on the display.
  After this, the measuring instrument automatically switches to the measuring mode. The display shows the relevant measured value.

Measuring mode when switching on

Connected sensor	Measuring mode
No sensor or pH/ORP electrode	pH or ORP measurement (depending on the last selected setting)
Conductivity measuring cell	Last selected measuring mode
2 sensors	Last selected measuring mode

Measuring

Overview of the measuring modes:

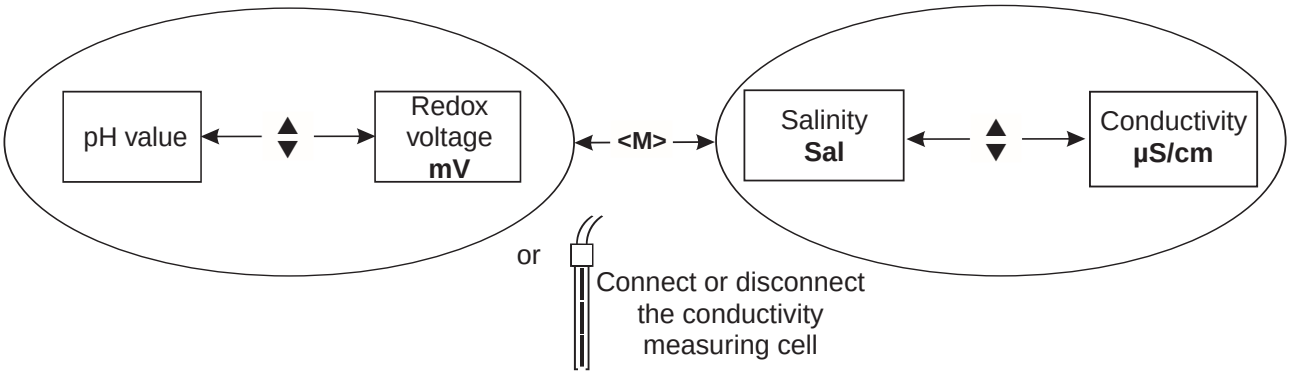

Special functions:

AutoRead (drift control)

The AutoRead function checks the stability of the measurement signal (except for the measurement of the ORP voltage). Activate AutoRead with **<AR>**. Press **<RUN/ENTER>** to start the AutoRead measurement. During the AutoRead measurement, *AR* flashes on the display until a stable measured value is reached. This can be terminated at any time taking over the current measured value with **<RUN/ENTER>**.

Temperature measurement during pH measurements

You can perform pH measurements with or without a temperature sensor as well as with the temperature sensor of a conductivity measuring cell. The measuring instrument recognizes which sensors are connected and switches automatically to the correct mode for the temperature measurement (display *TP*).
Manual temperature input: Set the temperature value with **<▲> <▼>** while pressing the **<RUN/ENTER>** key.

AutoRange measuring range selection

There are several measuring ranges available for conductivity measurements. If a measuring range is exceeded, AutoRange causes the measuring instrument to change automatically to the next measuring range.

Reference temperature of the conductivity, Tref

The reference temperature can be switched between 20 °C and 25 °C. It appears on the display as *Tref20* or *Tref25*. To switchover the reference temperature, see CONFIGURING.

Temperature compensation

You can select from the following settings:

- **Nonlinear temperature compensation (*nLF*)** according to EN 27 888
- **Linear temperature compensation (*Lin*)** with selectable coefficients of 0.001 ... 3.000 %/K
- **No temperature compensation (- - - -)**

Press **<CAL>** until *tc* appears to set the temperature compensation. Then, confirm with **<RUN/ENTER>**. Select the required option with **<CAL>**.
If necessary, select the temperature coefficients with **<▲> <▼>**. Return to the measuring mode with **<M>**.

pH calibration

AutoCal TEC

This process is specially adapted to the WTW technical buffer solutions as a fully automatic **single** or **two-point calibration**. The buffer solutions are automatically recognized by the measuring instrument. Depending on the instrument setting, the instrument displays the relevant buffer nominal value or the current electrode voltage in mV.

Valid buffer (values at 25 °C): 2.00 / 4.01 / 7.00 / 10.01

Note
The calibration for pH 10.01 is optimized for the WTW technical buffer solution TEP 10 Trace or TPL 10 Trace. Other buffer solutions can lead to an erroneous calibration. The correct buffer solutions are given in the WTW catalog or in the Internet.

AutoCal DIN

as AutoCal TEC, but matched to buffer solutions according to DIN 19266.

Valid buffer (values at 25 °C): 1.679 / 4.006 / 6.865 / 9.180

ConCal

is the conventional **two-point calibration** using two buffer solutions (pH 7.0 ± 0.5 and any other buffer solution) or a **single-point calibration** using any buffer solution and is used as a high-speed method.

Calibration evaluation

After calibrating, the measuring instrument automatically evaluates the calibration. The asymmetry and slope are evaluated separately. The worst evaluation appears on the display.


Display	Asymmetry[mV]	Slope [mV/pH]
	-15 ... +15	-60.5 ... -58
	-20 ... +20	-58 ... -57
	-25 ... +25	-61 ... -60.5 or -57 ... -56
 Clean the electrode according to the electrode operating manual	-30 ... +30	-62 ... -61 or -56 ... -50
E3 Invalid calibration	< -30 or > 30	< -62 or > -50

Note
If a printer is connected to the interface, a calibration protocol is automatically printed after a valid calibration.

AutoCal TEC / AutoCal DIN procedure:

The following example shows the AutoCal TEC calibration. In the AutoCal DIN calibration, *Cd...* instead of *Ct...* appears on the display. Otherwise, both procedures are identical.


- Connect the pH electrode to the measuring instrument.
  If necessary, press the **<M>** key repeatedly until the status display *pH* (pH measurement) or *U* (measurement of the ORP voltage) appears.

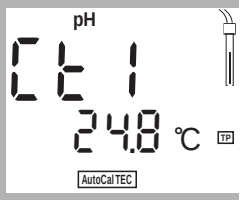

- Press the **<CAL>** key repeatedly until the display *Ct1* and the function display *AutoCal TEC* appears. The sensor symbol displays the evaluation of the last calibration (or no sensor symbol in the delivery state or after the measurement parameter has been reset).
- Immerse the pH electrode into the first buffer solution.
- When measuring without a temperature sensor:
  Enter the temperature of the first buffer solution with **<▲> <▼>** while pressing the **<RUN/ENTER>** key.



- Press **<RUN/ENTER>**. The AutoRead measurement begins. The electrode voltage (mV) or the buffer nominal value appears on the display. If the measured value is stable, *Ct2* appears.

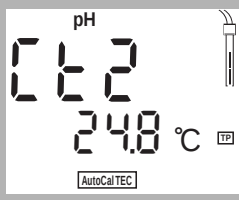

Note
At this point, the AutoCal TEC calibration can be terminated with **<M>**. This corresponds to a **single-point calibration**. To do this, the instrument uses the Nernst slope (-59.2 mV/pH at 25 °C) and determines the asymmetry of the electrode.


- Immerse the **two-point calibration** pH electrode in the second buffer solution to continue.
- When measuring without a temperature sensor:
  Enter the temperature of the second buffer solution with **<▲> <▼>** while pressing the **<RUN/ENTER>** key.



- Press **<RUN/ENTER>**. The AutoRead measurement begins. The electrode voltage (mV) or the buffer nominal value appears on the display.




- When the measured value is stable, the instrument displays the value of the slope and the calibration evaluation.

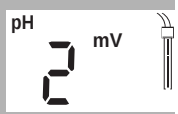


- Press **<RUN/ENTER>**. The instrument displays the value of the asymmetry.
- Switch to the measuring mode with **<M>**.


ConCal procedure:

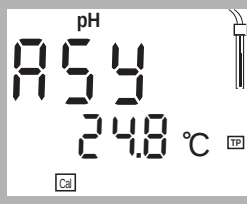

- Connect the pH electrode to the measuring instrument.
  If necessary, press the **<M>** key repeatedly until the status display *pH* (pH measurement) or *U* (measurement of the ORP voltage) appears.
- Press the <CAL> key repeatedly until the display *ASY* and the function display *Cal* appears. The sensor symbol displays the evaluation of the last calibration (or no sensor symbol in the delivery state or after the measurement parameter has been reset).
- Immerse the pH electrode in the first buffer solution (pH 7.0 ± 0.5 in two-point calibration).
- When measuring without a temperature sensor:
  Enter the temperature of the first buffer solution with **<▲> <▼>** while pressing the **<RUN/ENTER>** key.

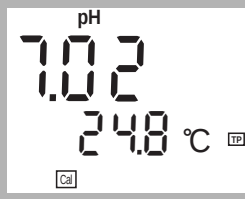


- Press the **<RUN/ENTER>** key.
  The measured pH value appears on the display.
- Set the measured value to the nominal pH value of the buffer solution (at the current temperature) with **<▲> <▼>**.
- If the measured value is stable, press the **<RUN/ENTER>** key. The value of the asymmetry appears.
- Press the **<RUN/ENTER>** key. *SLO* appears.

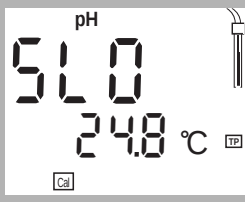

Note
At this point, the ConCal calibration can be terminated with **<M>**. This corresponds to a **single-point calibration**.
To do this, the instrument uses the Nernst slope (-59.2 mV/pH at 25 °C) and determines the asymmetry of the electrode.


- Immerse the **two-point calibration** pH electrode in the second buffer solution to continue.
- When measuring without a temperature sensor:
  Enter the temperature of the second buffer solution with **<▲> <▼>** while pressing the **<RUN/ENTER>** key.
- Press **<RUN/ENTER>**.

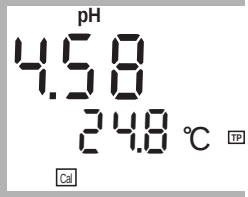

- Set the measured value to the nominal pH value of the buffer solution (at the current temperature) with **<▲> <▼>**.



- When the measured value is stable, press the **<RUN/ENTER>** key. The instrument displays the value of the slope and the calibration evaluation.

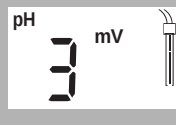

- Press **<RUN/ENTER>**. The instrument displays the value of the asymmetry.
- Switch to the measuring mode with **<M>**.

Conductivity: Determining the cell constants

Procedure


The cell constants are determined in the control standard 0.01 mol/l KCl.

Calibration evaluation

After the calibration, the measuring instrument automatically evaluates the current status of the calibration. The evaluation appears on the display.

Display	Cell constant [cm^{-1}]
	0.450 ... 0.500 cm^{-1}
E3 Invalid calibration	Outside the range 0.450 ... 0.500 cm^{-1}

Procedure for determining the cell constants:

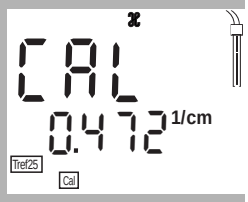


- Connect a conductivity measuring cell to the measuring instrument. If necessary, press the **<M>** key repeatedly until the status display ℋ (conductivity measurement) appears.
- Press the **<CAL>** key until *CELL* appears on the display.
- Press the **<RUN/ENTER>** key. Depending on the calibration status, the ℋ *CAL* display appears as well as:
  - the current, calibrated cell constant (**with** sensor symbol on the display) or
  - the fixed cell constant *0.475 1/cm* (**without** sensor symbol on the display). In this case, the measurement parameters are initialized.

Note
At this point, the procedure can be terminated with **<M>**.

- Immerse the conductivity measuring cell in the control standard solution, 0.01 mol/l KCl.
- Press **<RUN/ENTER>**. The AutoRead measurement begins.



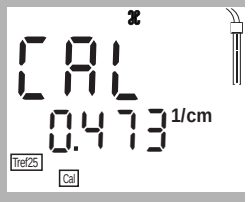

- When the measured value is stable, the instrument displays the determined cell constants and the calibration evaluation. The measuring instrument automatically stores the cell constants.
- Switch to the measuring mode with **<M>**.

Saving data

Saving data manually

Press the **<STO>** key in the measuring mode (display *No*. with the number of the next free memory location). Then, press **<RUN/ENTER>** and enter the ID number with **<▲> <▼>**. Terminate the save with **<RUN/ENTER>**. The instrument changes to the measuring mode.

Saving data automatically *Int 1*

The portable measuring instrument pH/Cond 340i has an internal data memory. It can store up to 500 datasets. The save interval (Int 1) determines the chronological interval between automatic save processes.
To set up the save interval, press **<STO>** while pressing the **<RUN/ENTER>** key (display *Int 1*) and set the interval with **<▲> <▼>** key. Then, press **<RUN/ENTER>** and enter the ID number with **<▲> <▼>**. Change to the last active measuring mode with **<RUN/ENTER>**. The automatic save is switched on (display *Auto Store*).

Outputting the data memory

You can output the data memory with the **<RCL>** key. By repeatedly pressing the **<RCL>** key, you reach the following functions:

StO dISP	Output stored data on the display
StO SEr	Output stored data on the serial interface
CAL dISP	Output calibration data on the display
CAL SEr	Output calibration data on the serial interface

Start the output with **<RUN/ENTER>**.

Transmitting data

Transmitting data manually

Press the **<RUN/ENTER>** key in the measuring mode.
This manually triggers a data transmission of the current measured value to the serial interface at any time - independently of the selected intervals.

Transmitting data automatically *Int 2*

The interval to the data transmission (Int 2) determines the chronological interval between automatic data transmissions. After the selected interval expires, the current data record is transmitted to the interface. To set up the transmission interval, press **<RCL>** while holding down the **<RUN/ENTER>** key (display *Int 2*). Then, set the interval with **<▲> <▼>**.


Configuring

Note
You can leave the configuration menu at any time with **<M>**. The parameters already changed are stored.


Procedure for configuring (factory settings appear in bold typeface)**:**



- Switch off the measuring instrument.
- While pressing the **<M>** key, press **<** ⏻ **>**.
- Select the required Baud rate with **<▲> <▼>**.
  Selection: 1200, 2400, **4800**, 9600 Baud.
- Then press the **<RUN/ENTER>** key.

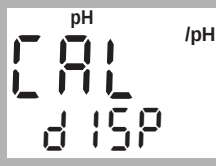

- Select the required display during the pH calibration with **<▲> <▼>**.
  Selection: **Buffer nominal value** (*/pH*) or current electrode voltage (*mV*).
- Then press the **<RUN/ENTER>** key.

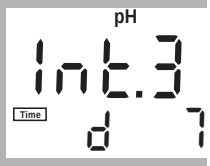

- Select the required calibration interval for pH/ORP measurements with **<▲> <▼>**.
  Selection: 1... **7**... 999 d.
- Then press the **<RUN/ENTER>** key.



- Select the required calibration interval for conductivity measurements with
  <▲> <▼>.
  Selection: 1... **180**... 999 d.
- Then press the **<RUN/ENTER>** key.



- Switchover the reference temperature of the conductivity with **<▲> <▼>**.
  Selection: 25 °C (*Tref25*) and 20 °C (*Tref20*).
- Then press the **<RUN/ENTER>** key.



- Select the date and time step-by-step with **<▲> <▼>**. In between, press the **<RUN/ENTER>** key each time.
- When the last **<RUN/ENTER>** key has been pressed, the instrument changes to the last active measuring mode.

Resetting to default settings

You can reset the measurement parameters and the configuration to the delivery status separately from one another (initialization).

Measurement parameters

The following measurement parameters (pH/ ℵ InI) can be reset to the delivery status:


pH/ORP (*pH InI*)	
Measuring mode	pH
Asymmetry	0 mV
Slope	-59.16 mV
Conductivity (ℵ *InI*)	
Measuring mode	ℵ
Cell constant	0.475 cm^{-1}

Configuration parameters

The following configuration parameters (*InI*) can be reset to the delivery status:

Baud rate	4800
Display during pH calibration	Buffer nominal value
Interval 1 (automatically saved)	OFF
Interval 2 (for data transmission)	OFF

Reset procedure:

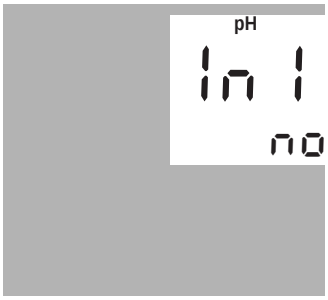

- To switch it off, press **<CAL><**t> while pressing the **<RUN/ENTER>** key.
- To reset the measurement parameters with **<▲> <▼>**, select *YES* and confirm with **<RUN/ENTER>**, or
- continue with the next parameters without a reset with the **<RUN/ENTER>** key (ℵ *InI* > *InI*).
- After the configuration parameters, *InI* changes the instrument to the last active measurement mode.

Technical data

Dimensions and weight

Length [mm]	172
Width [mm]	80
Height [mm]	37
Weight [kg]	approx. 0.3

Mechanical structure

Type of protection	IP 66

Electrical safety

Protective class	III

Test certificates

cETLus, CE

Ambient conditions

Storage	- 25 °C ... + 65 °C
Operation	-10 °C ... + 55 °C
Climatic class	2

pH/ORP measuring ranges

	Measuring range	Resolution
pH	- 2.00 ... + 19.99	0.01
U [mV]	- 1999 ... + 1999	1
T [°C]	- 5.0 ... + 105.0	0.1

Precision of pH/ORP (± 1 digit)

pH (after calibration)	± 0.01
U [mV]	± 1
T [°C]	± 0.1

pH correction function

Temperature input	
Manually [°C]	- 20 ... + 130

Measuring ranges of Cond

	Measuring range	Resolution
$\mathcal{H}$ [µS/cm]	0 ... 1999	1

	Measuring range	Resolution
$\mathcal{K}$ [mS/cm]	0.00 ... 19.99 0.0 ... 199.9 0 ... 500	0.01 0.1 1
SAL	0.0 ... 70.0 according to the IOT table	0.1
T [°C]	– 5.0 ... + 105.0	0.1

Precision of Cond (± 1 digit)

$\mathcal{K}$	Nonlinear compensation nLF Accuracy — Sample temperature ± 0.5 % — 0 °C ... 35 °C according to EN 27 888; ± 0.5 % — 35 °C ... 50 °C extended nLF function according to WTW measurements Linear compensation Lin Accuracy — Sample temperature ± 0.5 % — 10 °C ... 75 °C (The accuracy percentage always refers to the measured value.)
SAL	Range 0.0 ... 42.0 Accuracy — Sample temperature ± 0.1 — 5 °C ... 25 °C ± 0.2 — 25 °C ... 30 °C
T [°C]	± 0.1

Cell constant, calibrating

C [cm^{-1}]	0.450 ... 0.500

Reference temperature Cond

Tref	Can be set to 20 °C or 25 °C

Serial interface

Automatic switchover when a PC or a printer is connected via the cable, AK 340/B or AK 325/S.

Type	RS232, data output
Baud rate	Can be set to 1200, 2400, 4800, 9600 Baud
Data bits	8
Stop bit	2
Parity	None

	Handshake	RTS/CTS + Xon/Xoff
	Cable length	Max. 15m
Power supply	Batteries	4 x 1.5 V alkali-manganese batteries, Type AA
	Operational life	approx. 3000 operating hours
	Mains	The following applies to all plug-in power supplies: Connection max. overvoltage category II Plug-in power supply unit (Euro, US , UK, Australian plug) FRIWO FW7555M/09, 15.1432 Friwo Part. No. 1822089 Input: 100 ... 240 V ~ / 50 ... 60 Hz / 400 mA Output: 9 V = / 1,5 A
Guidelines and norms used	EMC	EG guideline 89/336/EWG EN 61326 A1:1998 EN 61000-3-2 A14:2000 EN 61000-3-3:1995 FCC Class A
	Instrument safety	EG guideline 73/23/EWG EN 61010-1 A2:1995
	Climatic class	VDI/VDE 3540
	Type of protection	EN 60529:1991

FCC Class A Equipment Statement

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

pH/Cond 340i - Inhaltsverzeichnis

Sicherheit 18
Display und Buchsenfeld 18
Netzbetrieb 19
Meßgerät einschalten 19
Messen 20
Kalibrieren pH 21
Leitfähigkeit: Zellenkonstante bestimmen 24
Speichern 25
Datenspeicher ausgeben 25
Daten übertragen 25
Konfigurieren 26
Rücksetzen (Reset) auf Grundeinstellungen 27
Technische Daten 28

Sicherheit


Sicherheits-hinweise

In den einzelnen Kapiteln dieser Bedienungsanleitung weisen die folgenden Sicherheitshinweise auf verschiedene Stufen von Gefahren hin:


Achtung
kennzeichnet Hinweise, die genau beachtet werden müssen, um mögliche leichte Verletzungen oder Schäden am Gerät oder der Umwelt zu vermeiden.

Display und Buchsenfeld

Display

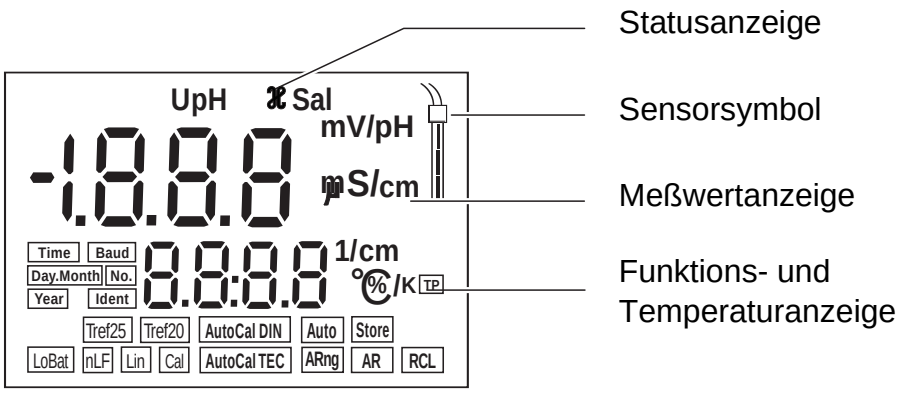

Buchsenfeld

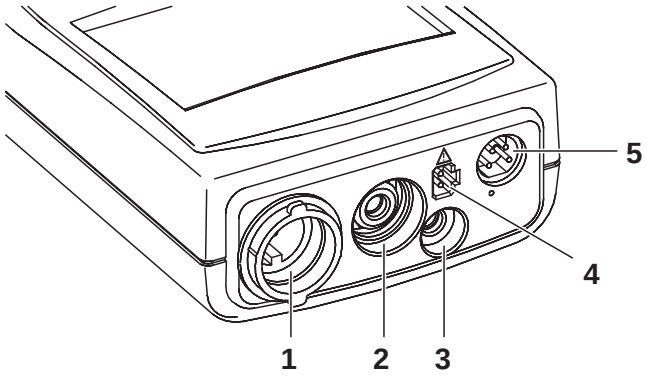

1 Leitfähigkeitsmeßzelle
2 pH-Meßkette
3 Temperaturmeßfühler pH
4 Steckernetzgerät
5 Serielle Schnittstelle RS232

Achtung
Schließen Sie an das Meßgerät nur Sensoren an, die keine unzulässigen Spannungen oder Ströme (> SELV und > Stromkreis mit Strombegrenzung) einspeisen können. Nahezu alle Sensoren - insbesondere WTW-Sensoren - erfüllen diese Bedingungen.

Netzbetrieb


Sie können das Meßgerät wahlweise mit Batterien oder mit dem Steckernetzgerät betreiben. Das Steckernetzgerät versorgt das Meßgerät mit Kleinspannung (7,5 V ... 12 V DC). Die Batterien werden dabei geschont.



Achtung
Die Netzspannung am Einsatzort muß innerhalb des Eingangs-Spannungsbereichs des Original-Steckernetzgeräts liegen (siehe TECHNISCHE DATEN).



Achtung
Verwenden Sie nur Original-Steckernetzgeräte (siehe TECHNISCHE DATEN).

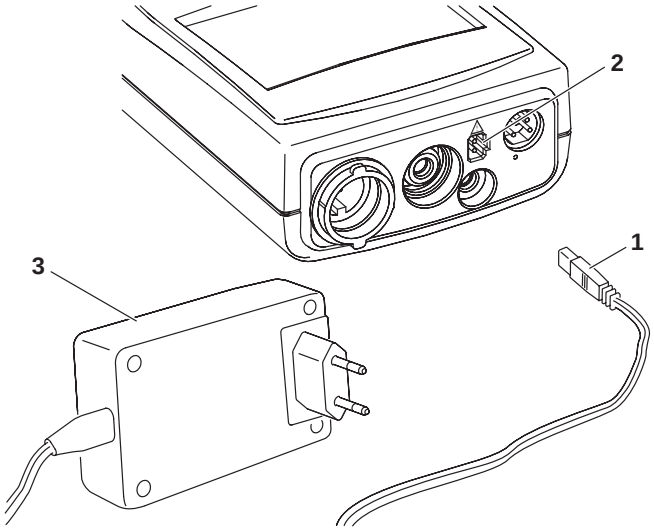

- Stecker (1) in die Buchse (2) des Meßgeräts stecken.
- Original WTW-Steckernetzgerät (3) an eine leicht zugängliche Steckdose anschließen

Meßgerät einschalten


- Taste **<** ⏻ **>** drücken.
  Im Display erscheint kurz der *Displaytest*.
  Das Meßgerät schaltet danach automatisch in den Meßmodus. Das Display zeigt den zugehörigen Meßwert an.

Meßmodus beim Einschalten

Angeschlossener Sensor	Meßmodus
Kein Sensor oder pH-/Redox-Meßkette	pH- oder Redoxmessung (je nach zuletzt gewählter Einstellung)
Leitfähigkeitsmeßzelle	zuletzt eingestellter Meßmodus
2 Sensoren	zuletzt eingestellter Meßmodus

Messen

Überblick über die Meßmodi:

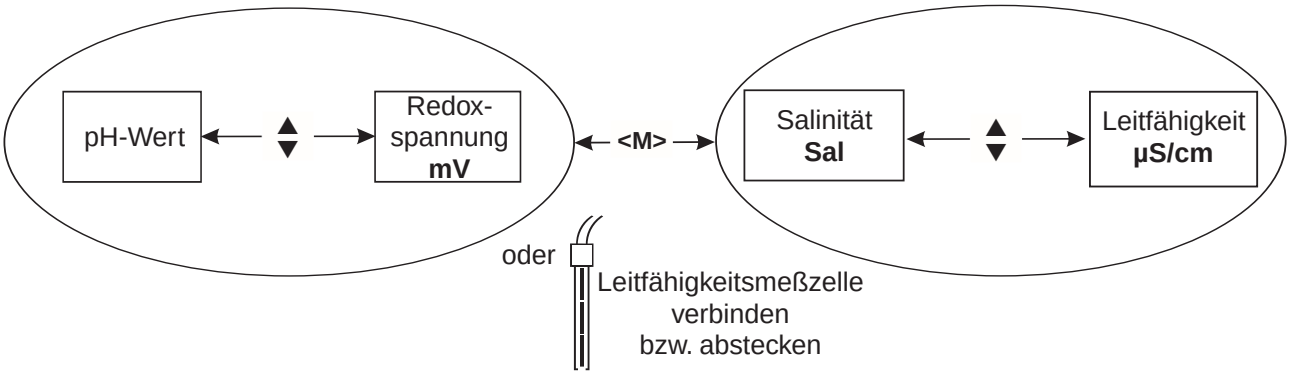

Spezialfunktionen:

AutoRead (Driftkontrolle)

Die Funktion AutoRead prüft die Stabilität des Meßsignals (außer bei der Messung bei Redoxspannung). AutoRead mit **<AR>** aktivieren. Zum Starten der AutoRead-Messung **<RUN/ENTER>** drücken. Während der AutoRead-Messung blinkt die Anzeige *AR*, bis ein stabiler Meßwert vorliegt. Ein Abbruch mit Übernahme des aktuellen Meßwerts ist jederzeit mit **<RUN/ENTER>** möglich.

Temperaturmessung bei pH-Messungen

Sie können pH-Messungen mit und ohne Temperaturmeßfühler sowie mit dem Temperaturmeßfühler einer Leitfähigkeitsmeßzelle durchführen. Das Meßgerät erkennt, welche Sensoren angeschlossen sind und schaltet automatisch in den richtigen Modus der Temperaturmessung (Anzeige *TP*). Manuelle Temperatureingabe: Bei gedrückter Taste **<RUN/ENTER>** Temperaturwert mit **<▲> <▼>** einstellen.

Meßbereichswahl AutoRange

Es stehen für Leitfähigkeitsmessungen mehrere Meßbereiche zur Verfügung. AutoRange bewirkt, daß das Meßgerät bei Überschreiten eines Meßbereichs automatisch in den nächsten Meßbereich wechselt.

Referenztemperatur Tref der Leitfähigkeit

Die Referenztemperatur ist zwischen 20 °C und 25 °C umschaltbar. Sie wird im Display mit *Tref20* oder *Tref25* angezeigt. Zum Umschalten der Referenztemperatur siehe KONFIGURIEREN.

Temperaturkompensation

Sie können unter folgenden Einstellungen wählen:

- **Nicht lineare Temperaturkompensation (*nLF*)** nach EN 27 888
- **Lineare Temperaturkompensation (*Lin*)** mit einstellbarem Koeffizienten von 0,001 ... 3,000 %/K
- **Keine Temperaturkompensation (- - - -)**

Zum Einstellen der Temperaturkompensation **<CAL>** drücken, bis *tc* erscheint. Anschließend mit **<RUN/ENTER>** bestätigen. Mit **<CAL>** gewünschte Option wählen. Gegebenenfalls Temperaturkoeffizienten mit **<▲> <▼>** einstellen. Mit **<M>** zurück zum Meßmodus.

Kalibrieren pH

AutoCal TEC ist als vollautomatische **Ein-** oder **Zweipunktkalibrierung** speziell auf die WTW-Technischen Pufferlösungen abgestimmt. Die Pufferlösungen werden vom Meßgerät automatisch erkannt. Je nach Geräteeinstellung zeigt das Gerät den zugehörigen Puffersollwert oder die aktuelle Meßkettenspannung in mV an.

Gültige Puffer (Werte bei 25 °C): 2,00 / 4,01 / 7,00 / 10,01

Hinweis
Die Kalibrierung bei pH 10,01 ist für die WTW-Technische Pufferlösung TEP 10 Trace bzw. TPL 10 Trace optimiert. Andere Pufferlösungen können zu einer fehlerhaften Kalibrierung führen. Die richtigen Pufferlösungen finden Sie im WTW-Katalog oder im Internet.

AutoCal DIN wie AutoCal TEC, jedoch abgestimmt auf Pufferlösungen nach DIN 19266.

Gültige Puffer (Werte bei 25 °C): 1,679 / 4,006 / 6,865 / 9,180

ConCal ist die konventionelle **Zweipunktkalibrierung** mit zwei Pufferlösungen (pH 7,0 ± 0,5 und eine beliebige weitere Pufferlösung) bzw. eine **Einpunktkalibrierung** mit einer beliebigen Pufferlösung als Schnellmethode.

Kalibrierbewertung Nach dem Kalibrieren bewertet das Meßgerät automatisch die Kalibrierung. Asymmetrie und Steilheit werden dabei getrennt bewertet. Die jeweils schlechtere Bewertung erscheint im Display.


Anzeige	Asymmetrie [mV]	Steilheit [mV/pH]
	-15 ... +15	-60,5 ... -58
	-20 ... +20	-58 ... -57
	-25 ... +25	-61 ... -60,5 bzw. -57 ... -56
 Meßkette gemäß Sensor-Bedienungsanleitung reinigen	-30 ... +30	-62 ... -61 bzw. -56 ... -50
E3 Unzulässige Kalibrierung	< -30 bzw. > 30	< -62 bzw. > -50

Hinweis
Wenn ein Drucker an die Schnittstelle angeschlossen ist, wird nach einer gültigen Kalibrierung automatisch ein Kalibrierprotokoll gedruckt.

Ablauf AutoCal TEC / AutoCal DIN:

Das folgende Beispiel zeigt die AutoCal TEC Kalibrierung. Bei der AutoCal DIN Kalibrierung wird im Display *Cd...* statt *Ct...* angezeigt. Ansonsten sind beide Abläufe identisch.


- pH-Meßkette an das Meßgerät anschließen.
  Gegebenenfalls Taste **<M>** so oft drücken, bis die Statusanzeige *pH* (pH-Messung) oder *U* (Messung der Redoxspannung) erscheint.

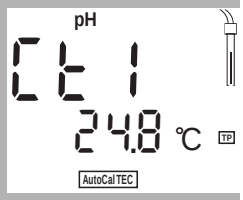

- Taste **<CAL>** drücken, bis die Anzeige *Ct1* und die Funktionsanzeige *AutoCal TEC* erscheint. Das Sensorsymbol zeigt die Bewertung der letzten Kalibrierung an (bzw. kein Sensorsymbol im Auslieferzustand oder nach einem Reset der Meßparameter).
- pH-Meßkette in die erste Pufferlösung tauchen.
- bei Messung ohne Temperaturmeßfühler:
  Temperatur der ersten Pufferlösung bei gedrückter Taste **<RUN/ENTER>** mit **<▲> <▼>** eingeben.



- **<RUN/ENTER>** drücken. Die AutoRead-Messung beginnt. Im Display erscheint die Meßkettenspannung (mV) oder der Puffersollwert. Wenn der Meßwert stabil ist, erscheint *Ct2*.

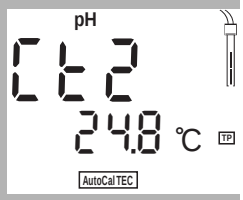

Hinweis
An dieser Stelle kann die AutoCal TEC-Kalibrierung mit **<M>** abgebrochen werden. Dies entspricht einer **Einpunktkalibrierung**. Dabei verwendet das Gerät die Nernst-Steilheit (-59,2 mV/pH bei 25 °C) und ermittelt die Asymmetrie der Meßkette.

- Zum Fortsetzen der **Zweipunktkalibrierung** pH-Meßkette in die zweite Pufferlösung tauchen.
- bei Messung ohne Temperaturmeßfühler:
  Temperatur der zweiten Pufferlösung bei gedrückter Taste **<RUN/ENTER>** mit **<▲> <▼>** eingeben.



- **<RUN/ENTER>** drücken. Die AutoRead-Messung beginnt. Im Display erscheint die Meßkettenspannung (mV) oder der Puffersollwert.




- Wenn der Meßwert stabil ist, zeigt das Gerät den Wert der Steilheit und die Kalibrierbewertung an.




- **<RUN/ENTER>** drücken. Das Gerät zeigt den Wert der Asymmetrie an.
- Mit **<M>** in den Meßmodus wechseln.


Ablauf ConCal:

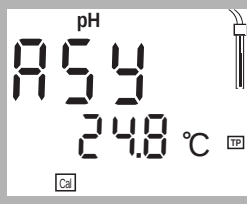

- pH-Meßkette an das Meßgerät anschließen.
  Gegebenenfalls Taste **<M>** so oft drücken, bis die Statusanzeige *pH* (pH-Messung) oder *U* (Messung der Redoxspannung) erscheint.
- Taste <CAL> so oft drücken, bis die Anzeige *ASY* und die Funktionsanzeige *Cal* erscheint. Das Sensorsymbol zeigt die Bewertung der letzten Kalibrierung an (bzw. kein Sensorsymbol im Auslieferzustand oder nach einem Reset der Meßparameter).
- pH-Meßkette in die erste Pufferlösung tauchen
  (pH 7,0 ± 0,5 bei Zweipunktkalibrierung).
- bei Messung ohne Temperaturmeßfühler:
  Temperatur der ersten Pufferlösung bei gedrückter Taste **<RUN/ENTER>** mit **<▲> <▼>** eingeben.

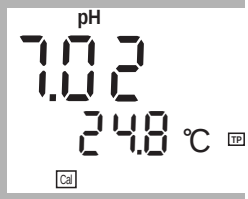


- Taste **<RUN/ENTER>** drücken.
  Im Display erscheint der pH-Meßwert.
- Meßwert mit **<▲> <▼>** auf den nominalen pH-Wert der Pufferlösung (bei der aktuellen Temperatur) einstellen.
- Wenn der Meßwert stabil ist, Taste **<RUN/ENTER>** drücken. Es erscheint der Wert der Asymmetrie.
- Taste **<RUN/ENTER>** drücken. Es erscheint *SLO*.

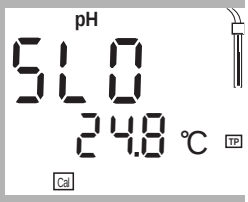

Hinweis
An dieser Stelle kann die ConCal-Kalibrierung mit **<M>** abgebrochen werden. Dies entspricht einer **Einpunktkalibrierung**. Dabei verwendet das Gerät die Nernst-Steilheit (-59,2 mV/pH bei 25 °C) und ermittelt die Asymmetrie der Meßkette.


- Zum Fortsetzen der **Zweipunktkalibrierung** pH-Meßkette in die zweite Pufferlösung tauchen.
- bei Messung ohne Temperaturmeßfühler:
  Temperatur der zweiten Pufferlösung bei gedrückter Taste **<RUN/ENTER>** mit **<▲> <▼>** eingeben.

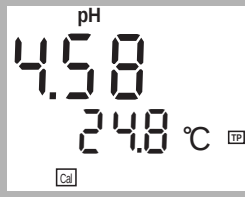

- **<RUN/ENTER>** drücken.
- Meßwert mit **<▲> <▼>** auf den nominalen pH-Wert der Pufferlösung (bei der aktuellen Temperatur) einstellen.



- Wenn der Meßwert stabil ist, Taste **<RUN/ENTER>** drücken. Das Gerät zeigt den Wert der Steilheit und die Kalibrierbewertung an.

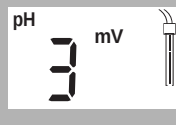

- **<RUN/ENTER>** drücken. Das Gerät zeigt den Wert der Asymmetrie an.
- Mit **<M>** in den Meßmodus wechseln.

Leitfähigkeit: Zellenkonstante bestimmen

Verfahren


Die Bestimmung der Zellenkonstante erfolgt im Kontrollstandard 0,01 mol/l KCl.

Kalibrier-bewertung

Nach dem Kalibrieren bewertet das Meßgerät automatisch den aktuellen Zustand der Kalibrierung. Die Bewertung erscheint im Display.

Anzeige	Zellenkonstante [cm^{-1}]
	0,450 ... 0,500 cm^{-1}
E3 Unzulässige Kalibrierung	außerhalb des Bereichs 0,450 ... 0,500 cm^{-1}

Ablauf Zellenkonstante bestimmen:

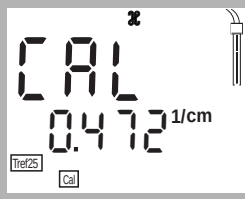


- Leitfähigkeitsmeßzelle an das Meßgerät anschließen.
  Gegebenenfalls Taste **<M>** so oft drücken, bis die Statusanzeige ℋ (Leitfähigkeits-Messung) erscheint.
- Taste **<CAL>** drücken, bis die Anzeige *CELL* erscheint.
- Taste **<RUN/ENTER>** drücken. Je nach Kalibrierzustand erscheint die Anzeige ℋ *CAL* sowie:
  - die aktuelle, kalibrierte Zellenkonstante (**mit** Sensorymbol im Display) oder
  - die feste Zellenkonstante *0,475 1/cm* (**ohne** Sensorsymbol im Display). In diesem Fall sind die Meßparameter initialisiert.

Hinweis
An dieser Stelle kann mit **<M>** abgebrochen werden.

- Leitfähigkeitsmeßzelle in die Kontrollstandardlösung 0,01 mol/l KCl tauchen.
- **<RUN/ENTER>** drücken. Die AutoRead-Messung beginnt.



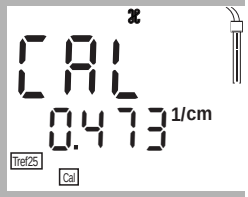

- Wenn der Meßwert stabil ist, zeigt das Gerät die ermittelte Zellenkonstante und die Kalibrierbewertung an. Das Meßgerät speichert die Zellenkonstante automatisch.
- Mit **<M>** in den Meßmodus wechseln.

Speichern

Daten manuell speichern

Im Meßmodus Taste **<STO>** drücken (Anzeige *No*. mit der Nummer des nächsten freien Speicherplatzes). Anschließend **<RUN/ENTER>** drücken und Identnummer mit **<▲> <▼>** eingeben. Speichern mit **<RUN/ENTER>** abschließen. Das Gerät wechselt in den Meßmodus.

Daten automatisch speichern *Int 1*

Das Taschenmeßgerät pH/Cond 340i verfügt über einen internen Datenspeicher. Darin können bis zu 500 Datensätze abgespeichert werden. Das Speicherintervall (Int 1) bestimmt den zeitlichen Abstand zwischen automatischen Speichervorgängen.
Zum Einstelllen des Speicherintervalls **<STO>** bei gedrückter Taste **<RUN/ENTER>** drücken (Anzeige *Int 1*) und Intervall mit **<▲> <▼>** einstellen. Anschließend **<RUN/ENTER>** drücken und Identnummer mit **<▲> <▼>** eingeben. Mit **<RUN/ENTER>** in den zuletzt aktiven Meßmodus wechseln. Das automatische Speichern ist eingeschaltet (Anzeige *Auto Store*).

Datenspeicher ausgeben

Mit der Taste **<RCL>** können Sie den Datenspeicher ausgeben. Durch mehrmaliges Drücken der Taste **<RCL>** gelangen Sie zu folgenden Funktionen:

StO dISP	gespeicherte Daten auf Display ausgeben
StO SEr	gespeicherte Daten auf serielle Schnittstelle ausgeben
CAL dISP	Kalibrierdaten auf Display ausgeben
CAL SEr	Kalibrierdaten auf serielle Schnittstelle ausgeben

Ausgabe mit **<RUN/ENTER>** starten.

Daten übertragen

Daten manuell übertragen

Im Meßmodus Taste **<RUN/ENTER>** drücken.
Damit lösen Sie jederzeit manuell eine Datenübertragung des aktuellen Meßwertes zur seriellen Schnittstelle aus - unabhängig von den eingestellten Intervallen.

Daten automatisch übertragen *Int 2*


Das Intervall zur Datenübertragung (Int 2) bestimmt den zeitlichen Abstand zwischen automatischen Datenübertragungen. Nach Ablauf des eingestellten Intervalls wird der aktuelle Datensatz an die Schnittstelle übertragen.
Zum Einstelllen des Übertragungsintervalls **<RCL>** bei gedrückter Taste **<RUN/ENTER>** drücken (Anzeige *Int 2*). Anschließend Intervall mit **<▲> <▼>** einstellen.


Konfigurieren


Hinweis
Sie können das Konfigurationsmenü jederzeit mit **<M>** verlassen. Die bereits geänderten Parameter sind gespeichert.

Ablauf Konfigurieren (Werkseinstellungen sind fett gekennzeichnet)**:**



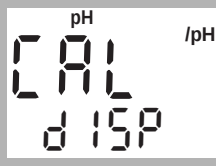

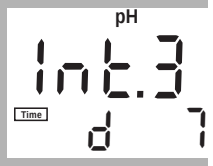

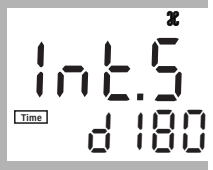





- Meßgerät ausschalten.
- Bei gedrückter Taste **<M>** Taste **<** ⏻ **>** drücken.
- Gewünschte Baudrate mit **<▲> <▼>** einstellen.
  Auswahl: 1200, 2400, **4800**, 9600 Baud.
- Anschließend Taste **<RUN/ENTER>** drücken.
- Gewünschte Anzeige während der pH-Kalibrierung mit **<▲> <▼>** einstellen.
  Auswahl: **Puffersollwert** (*/pH*) oder aktuelle Meßkettenspannung (*mV*).
- Anschließend Taste **<RUN/ENTER>** drücken.
- Gewünschtes Kalibrierintervall für pH/Redox-Messungen mit **<▲> <▼>** einstellen.
  Auswahl: 1... **7**... 999 d.
- Anschließend Taste **<RUN/ENTER>** drücken.
- Gewünschtes Kalibrierintervall für Leitfähigkeits-Messungen mit **<▲> <▼>** einstellen.
  Auswahl: 1... **180**... 999 d.
- Anschließend Taste **<RUN/ENTER>** drücken.
- Referenztemperatur der Leitfähigkeit mit **<▲> <▼>** umschalten.
  Auswahl: 25 °C (*Tref25*) und 20 °C (*Tref20*).
- Anschließend Taste **<RUN/ENTER>** drücken.
- Datum und Uhrzeit Schritt für Schritt mit **<▲> <▼>** einstellen. Dazwischen jeweils Taste **<RUN/ENTER>** drücken.
- Nach dem letzten Druck auf die Taste **<RUN/ENTER>** wechselt das Gerät in den zuletzt aktiven Meßmodus.

Rücksetzen (Reset) auf Grundeinstellungen

Sie können die Meßparameter und die Konfiguration getrennt voneinander auf den Lieferzustand rücksetzen (initialisieren).

Meßparameter

Die folgenden Meßparameter (pH/ ℵ InI) lassen sich auf den Auslieferzustand rücksetzen:

pH/Redox (*pH InI*)


Meßmodus	pH
Asymmetrie	0 mV
Steilheit	-59,16 mV
Leitfähigkeit (ℵ *InI*)	
Meßmodus	ℵ
Zellenkonstante	0,475 cm^{-1}

Konfigurations-parameter

Die folgenden Konfigurationsparameter (*InI*) lassen sich auf den Auslieferzustand rücksetzen:

Baudrate	4800
Anzeige während pH-Kalibrierung	Puffersollwert
Intervall 1 (automatisches Speichern)	OFF
Intervall 2 (für Datenübertragung)	OFF

Ablauf Rücksetzen:

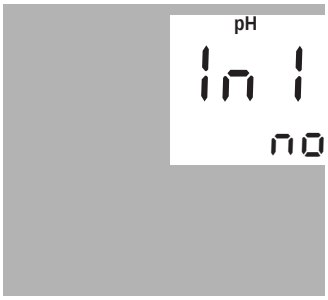

- Bei gedrückter Taste **<RUN/ENTER>** Taste **<CAL>** drücken.
- Zum Rücksetzen der Meßparameter mit **<▲> <▼>** *YES* wählen und mit **<RUN/ENTER>** bestätigen, oder
- mit Taste **<RUN/ENTER>** ohne Rücksetzen weiter zu den nächsten Parametern (ℵ *InI* > *InI*).
- Nach den Konfigurationsparametern *InI* wechselt das Gerät in den zuletzt aktiven Meßmodus.

Technische Daten

Abmessungen und Gewicht

Länge [mm]	172
Breite [mm]	80
Höhe [mm]	37
Gewicht [kg]	ca. 0,3

Mechanischer Aufbau

Schutzart	IP 66

Elektrische Sicherheit

Schutzklasse	III

Prüfzeichen

cETLus, CE

Umgebungs-bedingungen

Lagerung	- 25 °C ... + 65 °C
Betrieb	-10 °C ... + 55 °C
Klimaklasse	2

Meßbereiche pH/Redox

	Meßbereich	**Auflösung**
pH	- 2,00 ... + 19,99	0,01
U [mV]	- 1999 ... + 1999	1
T [°C]	- 5,0 ... + 105,0	0,1

Genauigkeit pH/Redox (± 1 digit)

pH (nach Kalibrierung)	± 0,01
U [mV]	± 1
T [°C]	± 0,1

Korrekturfunktion pH

Temperatureingabe	
Manuell [°C]	- 20 ... + 130

Meßbereiche Cond

	Meßbereich	Auflösung
$\mathscr{K}$ [µS/cm]	0 ... 1999	1
$\mathscr{K}$ [mS/cm]	0,00 ... 19,99 0,0 ... 199,9 0 ... 500	0,01 0,1 1
SAL	0,0 ... 70,0 nach IOT-Tabelle	0,1
T [°C]	– 5,0 ... + 105,0	0,1

Genauigkeit Cond (± 1 digit)

$\mathscr{K}$	Nichtlineare Kompensation nLF : Genauigkeit Meßguttemperatur ± 0,5 % 0 °C ... 35 °C nach EN 27 888; ± 0,5 % 35 °C ... 50 °C erweiterte nLF-Funktion nach WTW-Messungen Lineare Kompensation Lin : Genauigkeit Meßguttemperatur ± 0,5 % 10 °C ... 75 °C (der Prozentwert der Genauigkeit bezieht sich jeweils auf den Meßwert!)
SAL	Bereich 0,0 ... 42,0 Genauigkeit Meßguttemperatur ± 0,1 5 °C ... 25 °C ± 0,2 25 °C ... 30 °C
T [°C]	± 0,1

Zellenkonstante kalibrieren

C [cm^{-1}]	0,450 ... 0,500

Referenz-temperatur Cond

Tref	einstellbar 20 °C oder 25 °C

Serielle Schnittstelle

Automatische Umschaltung bei Anschluss eines PCs oder eines Druckers über das Kabel AK 340/B oder AK 325/S.

Typ	RS232, Datenausgabe
Baudrate	einstellbar 1200, 2400, 4800, 9600 Baud
Datenbits	8
Stoppbit	2
Parität	keine (None)
Handshake	RTS/CTS+Xon/Xoff
Kabellänge	max. 15 m

Energie-versorgung

Batterien	4 x 1,5 V Alkali-Mangan-Batterien Typ AA
Laufzeit	ca. 3000 Betriebsstunden
Netz	Für alle Steckernetzgeräte gilt: Anschluß max. Überspannungskategorie II Steckernetzgerät mit Euro-, US-, UK- und Austr.-Stecker: FRIWO FW7555M/09, 15.1432 Friwo Part. No. 1822089 Input: 100 ... 240 V ~ / 50 ... 60 Hz / 400 mA Output: 9 V = / 1,5 A

Angewendete Richtlinien und Normen

EMV	EG-Richtlinie 89/336/EWG EN 61326 A1:1998 EN 61000-3-2 A14:2000 EN 61000-3-3:1995 FCC Class A
Gerätesicherheit	EG-Richtlinie 73/23/EWG EN 61010-1 A2:1995
Klimaklasse	VDI/VDE 3540
Schutzart	EN 60529:1991

pH/Cond 340i - Sommaire

Sécurité 32
Affichage et emplacement des douilles 32
Alimentation du réseau. 33
Allumer l'appareil de mesure 33
Mesure 34
Calibration du pH 35
Conductivité: Détermination de la constante de cellule 38
Enregistrement 39
Écrire en sortie la mémoire de données. 39
Transmission de données 39
Configuration 40
Retourner (Reset) à l'état initial 41
Données techniques. 42

Sécurité


Indications de sécurité

Dans les chapitre suivants de ce mode d'emploi, les indications de sécurité avertissent sur les différents stades des dangers possibles:


Attention
signale les indications à respecter précisément pour éviter des blessures légères, des endommagement de l'appareil ou de l'environnement.

Affichage et emplacement des douilles

Affichage

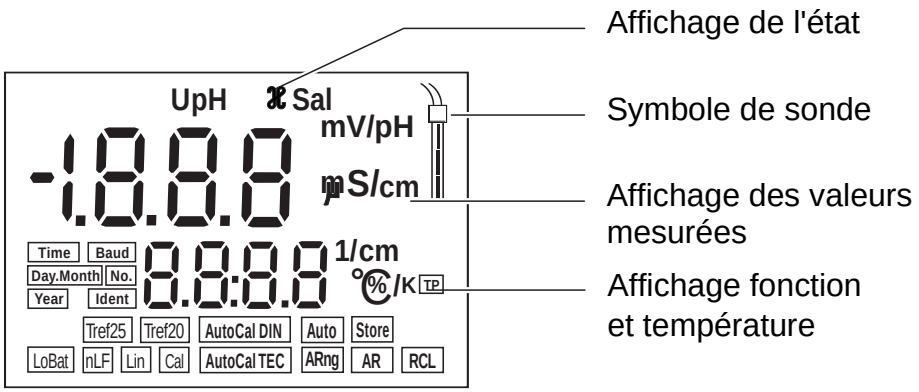

emplacement des douilles

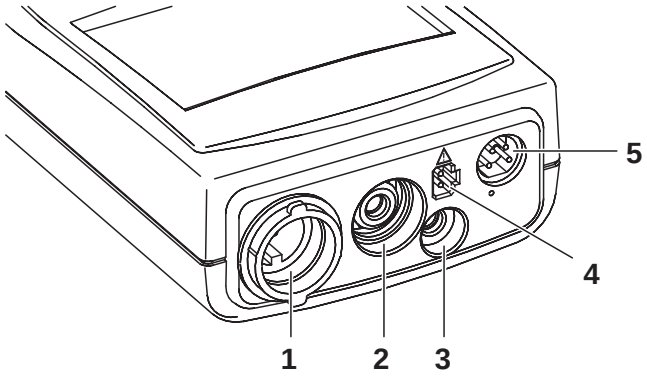

1 Cellule de mesure de la conductivité

2 Chaîne de mesure du pH

3 Sonde de température pH

4 Appareil d'alimentation

5 Interface sérielle RS232

Attention
Ne raccordez à l'appareil de mesure que des sondes ne pouvant pas être alimentées par des tensions ou courants nonautorisés (> SELV et > circuit avec limitation de courant. A peu près toutes les sondes - les sondes WTW en particulier - remplissent ces conditions.

Alimentation du réseau


Vous pouvez alimenter l'appareil de mesure ou avec des piles ou bien avec un transformateur d'alimentation. Le transformateur d'alimentation assure l'alimentation de l'appareil de mesure en très basse tension (7,5 V ... 12 V DC), ce qui ménage les piles.



Attention
La tension du secteur du lieu d'utilisation doit se situer dans la plage de tension d'entrée du transformateur d'alimentation original (voir DONNÉES TECHNIQUES).



Attention
Utilisez uniquement les transformateurs d'alimentation originaux (voir DONNÉES TECHNIQUES).

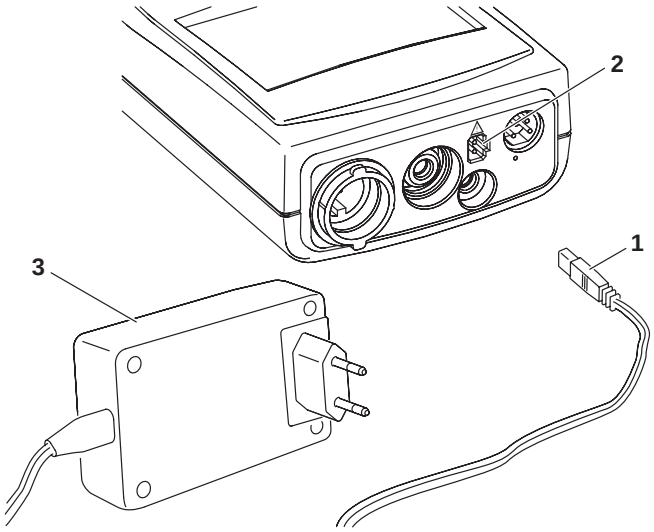

- Brancher le connecteur (1) dans la douille (2) de l'appareil de mesure.
- Brancher le transformateur d'alimentation (3) sur une prise.

Allumer l'appareil de mesure


- Appuyer sur la touche ⏻ **>**.
  A l'écran s'affiche rapidement le *test d'affichage*.
  Ensuite, l'appareil commute automatiquement sur le mode de mesure.
  L'affichage indique la valeur mesurée.

Mode de mesure lors de la connexion

Sonde branchée	Mode de mesure
Pas de sonde ni de chaîne de mesure pH-/Redox	Mesure de pH ou de Redox (selon le mode sélectionné en dernier lieu)
Cellule de mesure de la conductivité	Mode de mesure sélectionné en dernier lieu
2 Sondes	Mode de mesure sélectionné en dernier lieu

Mesure

Résumé des modes de mesure:

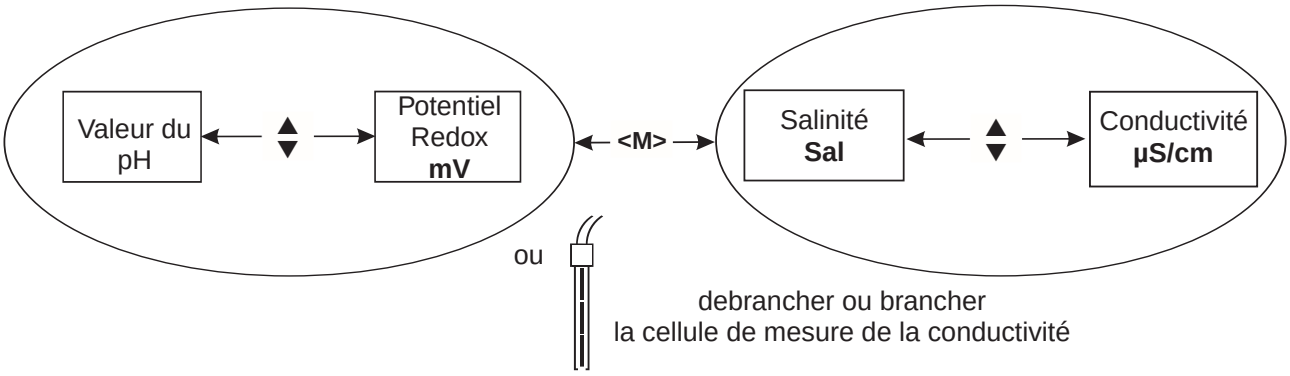

Fonctions spéciales:

AutoRead (Contrôle de dérive)

La fonction AutoRead examine la stabilité du signal de mesure (sauf mesure d'un potentiel Redox). Activer AutoRead avec **<AR>**. Pour mettre en route la mesure AutoRead, appuyer sur **<RUN/ENTER>**. Pendant la mesure AutoRead, l'indication *AR* clignote jusqu'à ce qu'une valeur de mesure stable se présente. L'interruption avec enregistrement de la valeur de mesure actuelle est possible à tout moment en appuyant sur **<RUN/ENTER>**.

Mesures de température lors des mesures de pH

Vous pouvez effectuer les mesures de pH avec et sans sonde de température, et également avec la sonde de température d'une cellule de mesure de la conductivité. L'appareil de mesure reconnaît les sondes branchées et automatiquement, il commute au mode correct de la mesure de température (Indication affichée *TP*).
Entrée de température manuelle: Régler la valeur de la température en appuyant sur la touche **<RUN/ENTER>** et avec **<▲> <▼>**.

Choix de la plage de mesure AutoRange

Pour réaliser les mesures de conductivité, il y a plusieurs plages de mesure à la disposition. AutoRange assure que, en cas d'un dépassement d'une plage de mesure, l'appareil de mesure change automatiquement dans la plage de mesure suivante.

Température de référence Tref de la conductivité

La température de référence est commutable entre 20 °C et 25 °C. Elle est indiquée dans la fenêtre de l'affichage par *Tref20* ou *Tref25*. Pour commuter la température de référence voir CONFIGURATION.

Compensation de température

Vous pouvez choisir entre les positionnements suivants:

- **Compensation de température non linéaire (*nLF*)** selon NE 27 888
- **Compensation de température linéaire (*Lin*)** aux coefficients réglables de 0,001 ... 3,000 %/K
- **Pas de compensation de température (- - - -)**

Pour ajuster la compensation de température appuyer sur **<CAL>** jusqu'à ce que *tc* s'affiche. Ensuite confirmer avec **<RUN/ENTER>**. Choisir l'option souhaitée avec **<CAL>**. Éventuellement ajuster le coefficient de température avec **<▲> <▼>**. Avec **<M>** retour au mode de mesure.

Calibration du pH

AutoCal TEC

est spécialement adaptée à des solutions tampons WTW en tant que **calibration** un ou **deux points** entièrement automatiqueWTW. Les solutions tampons sont automatiquement reconnues par l'appareil de mesure. Suivant le réglage de l'appareil, il indique la valeur tampon prescrite correspondante ou le potentiel de chaîne de mesure actuelle en mV.

Tampons valables (Valeurs à 25 °C): 2,00 / 4,01 / 7,00 / 10,01

Remarque
La calibration à pH 10,01 est optimisée quant à la solution tampon WTW TEP 10 Trace ou TPL 10 Trace. En ce qui concerne d'autres solutions tampons, elles pourraient mener à une calibration incorrecte. Vous trouverez les solutions tampons valables dans le catalogue de WTW ou dans l'Internet.

AutoCal DIN

comme AutoCal TEC, mais adapté à des solutions tampons suivant DIN 19266.

Tampons valables (Valeurs à 25 °C): 1,679 / 4,006 / 6,865 / 9,180

ConCal

est la **calibration deux points** avec deux solutions tampons (pH 7,0 ± 0,5 et une autre solution tampon quelconque) ou bien une **calibration un point** avec une solution tampon quelconque servant de méthode rapide.

Evaluation de calibration

Après la calibration, l'appareil de mesure évalue automatiquement la calibration. Ce faisant, il évalue l'asymétrie et la pente séparément. C'est toujours l'évaluation la plus mauvaise qui s'affiche à l'écran.


Indication	Asymétrie [mV]	Pente [mV/pH]
	-15 ... +15	-60,5 ... -58
	-20 ... +20	-58 ... -57
	-25 ... +25	-61 ... -60,5 ou bien. -57 ... -56
 Nettoyer la chaîne de mesure conformément au mode d'emploi de la sonde	-30 ... +30	-62 ... -61 ou bien. -56 ... -50
E3 Calibration incorrecte	< -30 ou bien > 30	< -62 ou bien > -50

Remarque
Si une imprimante est branchée sur l'interface, un protocole de calibration est imprimé automatiquement après une calibration valable.

Déroulement AutoCal TEC / AutoCal DIN:

L'exemple suivant montre la calibration AutoCal TEC. Pendant la calibration AutoCal DIN apparaît dans la fenêtre *Cd...* au lieu de *Ct...*. Autrement, les deux déroulements sont identiques.


- Raccorder la chaîne de mesure du pH à l'appareil de mesure.
  Appuyer sur la touche **<M>** éventuellement plusieurs fois jusqu'à affichage de l'indication d'état *pH* (mesure de pH) ou *U* (mesure du potentiel Redox).

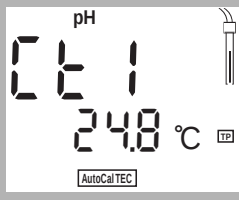

- Appuyer sur la touche **<CAL>** jusqu'à affichage de l'indication *Ct1* et de la fonction *AutoCal TEC*. Le symbole de sonde indique l'évaluation de la calibration ultérieure (ou bien il n'y a pas de symbole de sonde en état de livraison ou après reset des paramètres de mesure).
- Immerger la chaîne de mesure du pH dans la première solution tampon
- en cas de mesure sans sonde de température:
  entrer la température de la première solution tampon en appuyant la touche **<RUN/ENTER>** avec **<▲> <▼>**.



- Appuyer sur **<RUN/ENTER>**. La mesure AutoRead se met en marche. Le potentiel de chaîne de mesure (mV) ou la valeur tampon prescrite apparaît dans la fenêtre d'affichage. Lorsque la valeur mesurée est stable, il s'affiche *Ct2*.

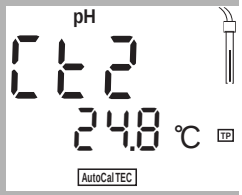

Remarque
À ce moment, on arrête la calibration AutoCal TEC avec **<M>**. Ceci correspond à une **calibration un point**. Dans ce cas, l'appareil utilise la pente Nernst (-59,2 mV/pH à 25 °C) et détermine l'asymétrie de la chaîne de mesure.

- Pour continuer la **calibration deux points** immerger la chaîne de mesure pH dans la deuxième solution tampon.
- en cas de mesure sans sonde de température:
  Entrer la température de la deuxième solution tampon en appuyant sur la touche **<RUN/ENTER>** avec **<▲> <▼>**.



- Appuyer sur **<RUN/ENTER>**. La mesure AutoRead se met en marche. Le potentiel de chaîne de mesure (mV) ou la valeur tampon prescrite apparaît dans la fenêtre d'affichage.




- Lorsque la valeur mesurée est stable, l'appareil indique la valeur de la pente, ainsi que l'évaluation de calibration.




- Appuyer sur **<RUN/ENTER>**. L'appareil indique la valeur de l'asymétrie.
- Commuter sur le mode de mesure avec **<M>**.


Déroulement ConCal:

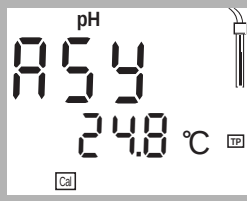

- Raccorder la chaîne de mesure du pH à l'appareil de mesure.
  Appuyer sur la touche **<M>** éventuellement plusieurs fois jusqu'à affichage de l'indication d'état *pH* (mesure de pH) ou *U* (mesure du potentiel Redox).
- Appuyer sur la touche <CAL> jusqu'à affichage de l'indication *ASY* et de la fonction *Cal*. Le symbole de sonde indique l'évaluation de la calibration ultérieure (ou bien il n'y a pas de symbole de sonde en état de livraison ou après reset des paramètres de mesure).
- immerger la chaîne de mesure pH dans la première solution tampon (pH 7,0 ± 0,5 lors de la calibration deux points).
- en cas de mesure sans sonde de température:
  entrer la température de la première solution tampon en appuyant la touche **<RUN/ENTER>** avec **<▲> <▼>**.

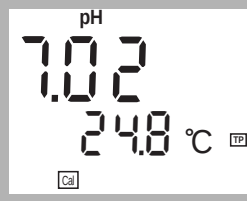


- Appuyer sur la touche **<RUN/ENTER>**.
  A l'écran apparaît la valeur de pH mesurée.
- Ajuster la valeur de mesure avec **<▲> <▼>** à la valeur nominale du pH de la solution tampon (à la température actuelle).
- Lorsque la valeur mesurée est stable, appuyer sur la touche **<RUN/ENTER>**. Il apparaît la valeur de l'asymétrie.
- Appuyer sur la touche **<RUN/ENTER>**. Il s'affiche *SLO*.

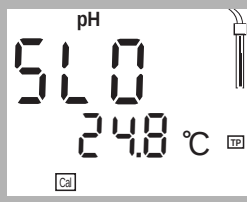

Remarque
À ce moment, on peut arrêter la calibration ConCal avec **<M>**. Ceci correspond à une **calibration un point**. Dans ce cas, l'appareil utilise la pente Nernst (-59,2 mV/pH à 25 °C) et détermine l'asymétrie de la chaîne de mesure.


- Pour continuer la **calibration deux points** immerger la chaîne de mesure pH dans la deuxième solution tampon.
- en cas de mesure sans sonde de température:
  Entrer la température de la deuxième solution tampon en appuyant la touche **<RUN/ENTER>** avec **<▲> <▼>**.

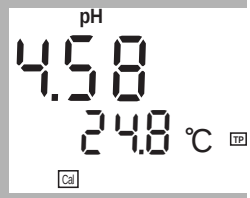

- Appuyer sur **<RUN/ENTER>**.
- Ajuster la valeur de mesure avec **<▲> <▼>** à la valeur nominale de pH de la solution tampon (à la température actuelle).



- Lorsque la valeur mesurée est stable, appuyer sur la touche **<RUN/ENTER>**. L'appareil indique la valeur de la pente, ainsi que l'évaluation de calibration.

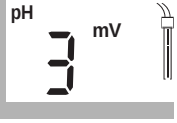

- Appuyer sur **<RUN/ENTER>**. L'appareil indique la valeur de l'asymétrie.
- Commuter sur le mode de mesure avec **<M>**.

Conductivité: Détermination de la constante de cellule

Procédure

La détermination de la constante de cellule s'effectue au standard de contrôle 0,01 mol/l KCl.


Evaluation de calibration

Après la calibration, l'appareil de mesure évalue automatiquement l'état actuel de la calibration. L'évaluation apparaît à l'écran.

Indication	Constante de cellule [cm^{-1}]
	0,450 ... 0,500 cm^{-1}
E3 Calibration incorrecte	en dehors de 0,450 ... 0,500 cm^{-1}

Déroulement de la détermination de la constante de cellule:

- Raccorder à l'appareil de mesure la cellule de mesure de la conductivité. Appuyer sur la touche **<M>** éventuellement plusieurs fois jusqu'à affichage de l'indication d'état ℋ (mesure de conductivité).
- Appuyer sur la touche **<CAL>** jusqu'à ce que l'indication*CELL* apparaisse.

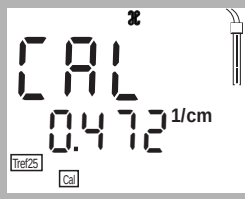


- Appuyer sur la touche **<RUN/ENTER>**. Suivant l'état de la calibration l'indication ℋ *CAL* s'affiche ainsi que:
  - la constante de cellule actuelle est calibrée (**avec** le symbole de sonde dans la fenêtre) ou bien
  - la constante de cellule fixe *0,475 1/cm* (**sans** symbole de sonde dans la fenêtre). Dans ce cas, les paramètres de mesure sont initialisés.

Remarque
À ce moment, on peut arrêter avec **<M>**.

- Immerger la cellule de mesure de la conductivité dans la solution de contrôle standard 0,01 mol/l KCI.
- Appuyer sur **<RUN/ENTER>**. La mesure AutoRead se met en marche.



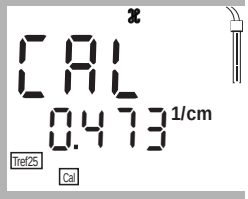

- Lorsque la valeur mesurée est stable, l'appareil indique la valeur de la constante de cellule déterminée, ainsi que l'évaluation de calibration. L'appareil de mesure enregistre automatiquement la constante de cellule.
- Commuter sur le mode de mesure avec **<M>**.

Enregistrement

Enregistrement manuel de données

Appuyer sur la touche **<STO>** au mode de mesure (indication affichée *No*. avec le numéro de la position de mémoire disponible). Ensuite appuyer sur **<RUN/ENTER>** et entrer le numéro d'identification avec **<▲> <▼>**. Finir l'enregistrement avec **<RUN/ENTER>**. L'appareil commute sur le mode de mesure.

Enregistrement automatique de données *Int 1*

L'appareil de mesure de poche pH/Cond 340i dispose d'une mémoire de données interne. Il est possible d'y enregistrer jusqu'à 500 groupes de données. L'intervalle d'enregistrement (Int 1) détermine l'intervalle temporel entre les processus d'enregistrement automatiques.
Pour régler l'intervalle d'enregistrement appuyer sur **<STO>** et appuyer en même temps sur la touche **<RUN/ENTER>** (indication affichée *Int 1*) et ajuster l'intervalle avec **<▲> <▼>**. Ensuite appuyer sur **<RUN/ENTER>** et entrer le numéro d'identification avec **<▲> <▼>**. Commuter avec **<RUN/ENTER>** dans le mode de mesure actif ultérieurement. L'enregistrement automatique est activé (indication affichée *Auto Store*).

Écrire en sortie la mémoire de données.

Appuyer sur la touche **<RCL>** pour écrire en sortie la mémoire de données. Vous arrivez à des fonctions indiquées ci-dessous en appuyant plusieurs fois sur la touche **<RCL>**:

StO dISP	écrire en sortie des données enregistrées dans la fenêtre d'affichage
StO SEr	écrire en sortie des données sur l'interface sérielle
CAL dISP	écrire en sortie des données de calibration dans la fenêtre d'affichage
CAL SEr	écrire en sortie des données de calibration sur l'interface sérielle

Déclencher l'écriture en sortie avec **<RUN/ENTER>**.

Transmission de données

Transmission manuelle de données

Appuyer sur la touche **<RUN/ENTER>** au mode de mesure.
Ainsi vous déclenchez à tout moment manuellement une transmission de données de la valeur mesurée actuelle vers l'interface sérielle - indépendamment des intervalles configurés.

Transmission de données automatique *Int 2*


L'intervalle pour la transmission de données (Int 2) détermine l'intervalle de temps entre les transmissions de données automatiques. Après écoulement de l'intervalle réglé, le groupe de données actuel est transmis à l'interface.
Pour régler l'intervalle de transmission appuyer sur **<RCL>** et en même temps sur la touche **<RUN/ENTER>** (indication affichée *Int 2*). Ensuite, régler l'intervalle avec **<▲> <▼>**.


Configuration

Remarque
Vous pouvez quitter le menu de configuration à tout moment en appuyant sur **<M>**. Les paramètres déjà modifiés sont enregistrés.

Déroulement de la configuration (Les ajustements faits à l'usine sont indiqués en gras)**:**



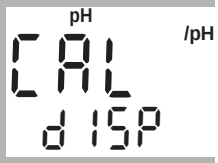

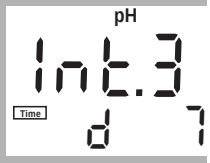







- Éteindre l'appareil de mesure.
- Appuyer sur la touche **<M>** et en même temps sur **<** ⏻ **>**.
- Ensuite, régler baudrate désiré avec **<▲> <▼>**.
  Au choix: 1200, 2400, **4800**, 9600 Baud.
- Ensuite appuyer sur la touche **<RUN/ENTER>**.
- Indication affichée souhaitée régler pendant la calibration pH avec **<▲> <▼>**.
  Au choix: **Valeur tampon prescrite** (*/pH*) ou potentiel de chaîne de mesure actuel (*mV*).
- Ensuite appuyer sur la touche **<RUN/ENTER>**.
- Intervalle de calibration souhaité pour des mesures pH/Redox se règle avec **<▲> <▼>**.
  Au choix: 1... **7**... 999 d.
- Ensuite appuyer sur la touche **<RUN/ENTER>**.
- Intervalle de calibration souhaité pour des mesures de conductivité se règle avec **<▲> <▼>**.
  Au choix: 1... **180**... 999 d.
- Ensuite appuyer sur la touche **<RUN/ENTER>**.
- Commuter la température de référence de la conductivité avec **<▲> <▼>**
  Au choix: 25 °C (*Tref25*) et 20 °C (*Tref20*).
- Ensuite appuyer sur la touche **<RUN/ENTER>**.
- Ajuster la date et l'heure en pas à pas avec **<▲> <▼>**. Entre les pas, appuyer sur la touche **<RUN/ENTER>**.
- Après avoir appuyé la dernière fois sur la touche **<RUN/ENTER>** l'appareil commute au mode de mesure actif ultérieurement.

Retourner (Reset) à l'état initial

Vous pouvez remettre à l'état initial de livraison les paramètres de mesure et la configuration séparément (initialiser).

Paramètres de mesure

Les paramètres de mesure suivants (pH/ ℵ InI) sont à remettre à l'état initial de livraison:

pH/Redox (*pH In*)


Mode de mesure	pH
Asymétrie	0 mV
Pente	-59,16 mV
Conductivité (ℵ *InI*)	
Mode de mesure	ℵ
Constante de cellule	0,475 cm^{-1}

Paramètres de configuration

Les paramètres de configuration suivant (*InI*) sont à remettre à l'état initial de livraison:

Débit en bauds	4800
Indication affichée lors de la calibration pH	Valeur tampon prescrite
Intervalle 1 (enregistrement automatique)	OFF
Intervalle 2 (pour transmission de données)	OFF

Déroulement remise à l'état initial:

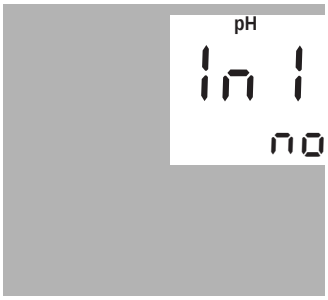

- Appuyer sur la touche **<RUN/ENTER>** et en même temps sur **<CAL>**.
- Si les paramètres de mesure sont à remettre à l'état initial, choisir avec **<▲> <▼>** *YES* et confirmer avec **<RUN/ENTER>**, ou,
- sans remettre, continuer avec la touche **<RUN/ENTER>** jusqu'aux paramètres suivants (ℵ *InI* > *InI*).
- D'après les paramètres de configuration *InI* l'appareil commute au mode de mesure actif ultérieur.

Données techniques

Dimensions et poids

Longueur [mm]	172
Largeur [mm]	80
Hauteur [mm]	37
Poids [kg]	env. 0,3

Construction mécanique

Manière de protection	IP 66

Sécurité électrique

Classe de protection	III

Marque de contrôle

cETLus, CE

Conditions de milieu

Stockage	- 25 °C ... + 65 °C
Fonctionnement	-10 °C ... + 55 °C
Catégorie climatique	2

Plages de mesure pH/Redox

	Plage de mesure	Résolution
pH	- 2,00 ... + 19,99	0,01
U [mV]	- 1999 ... + 1999	1
T [°C]	- 5,0 ... + 105,0	0,1

Précision pH/Redox (± 1 digit)

pH (après calibration)	± 0,01
U [mV]	± 1
T [°C]	± 0,1

Fonction de correction pH

Entrée de la température	
Manuelle [°C]	- 20 ... + 130

Plages de mesure Cond

	Plage de mesure	Résolution
$\varkappa$ [µS/cm]	0 ... 1999	1
$\varkappa$ [mS/cm]	0,00 ... 19,99 0,0 ... 199,9 0 ... 500	0,01 0,1 1
SAL	0,0 ... 70,0 selon tableau IOT	0,1
T [°C]	– 5,0 ... + 105,0	0,1

Précision Cond (± 1 digit)

$\varkappa$	Compensation non linéaire nLF : Précision — température de la solution à mesurer ± 0,5 % — 0 °C ... 35 °C selon NE 27 888; ± 0,5 % — 35 °C ... 50 °C fonction nLF élargie selon mesures WTW Compensation linéaire Lin : Précision — Température de la solution à mesurer ± 0,5 % — 10 °C ... 75 °C (Le pourcentage de précision se réfère toujours à la valeur mesurée!)
SAL	Plage 0,0 ... 42,0 Précision — Température de la solution à mesurer ± 0,1 — 5 °C ... 25 °C ± 0,2 — 25 °C ... 30 °C
T [°C]	± 0,1

Calibrer constante de cellule

C [cm^{-1}]	0,450 ... 0,500

Température de référence Cond

Tref	réglable à 20 °C ou 25 °C

Interface sérielle

Commutation automatique en cas de connexion d'un PC ou d'une imprimante à l'aide du câble AK 340/B ou AK 325/S.

Type	RS232, Sortie de données
Débit en bauds	réglable 1200, 2400, 4800, 9600 Baud
Bits de donnée	8
Bit d'arrêt	2
Parité	non (None)
Handshake	RTS/CTS + Xon/Xoff
Longueur du cable	15m max.

Alimentation d'énergie

Piles	4 x 1,5 V piles alcalines au manganèse de type AA
Durée de service	env. 3000 heures de service
Secteur	Pour tous les transformateurs d'alimentation, observer: connexion max. catégorie de surtension II Transformateur d'alimentation avec fiches UE, US, UK, Australie: FRIWO FW7555M/09, 15.1432 Friwo Part. No. 1822089 Input: 100 ... 240 V ~ / 50 ... 60 Hz / 400 mA Output: 9 V = / 1,5 A

Réglementations et normes appliquées

EMV	Règlementation UE 89/336/CEE EN 61326 A1:1998 EN 61000-3-2 A14:2000 EN 61000-3-3:1995 FCC Class A
Sécurité de l'appareil	Règlementation UE 73/23/CEE EN 61010-1 A2:1995
Catégorie climatique	VDI/VDE 3540
Manière de protection	EN 60529:1991

pH/Cond 340i - Índice

Seguridad 46
Display y bujes de conexión 46
Conexión a la red 47
Conectar el instrumento 47
Medir 48
Calibración pH 49
Conductibilidad: Determinar la constante celular 52
Archivar en memoria 53
Llamar los datos archivados en memoria 53
Transferir datos 53
Configurar 54
Reajustar al valor inicial (Reset) 55
Especificaciones técnicas 56

Seguridad


Instrucciones de seguridad

En los diferentes capítulos del presente manual las siguientes indicaciones de seguridad hacen referencia a los diferentes grados de seguridad:


Atención
identifica observaciones de seguridad que Ud. debe respetar para evitar eventuales daños a personas y daños materiales al instrumento y cargas al medio ambiente.

Display y bujes de conexión

Display

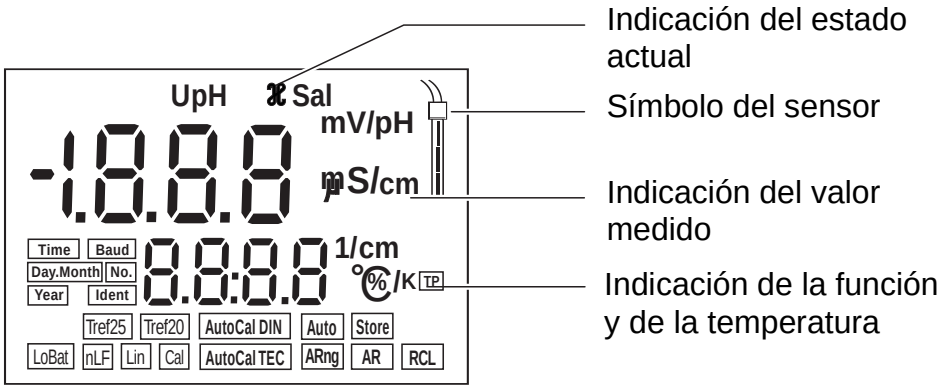

Conexiones varias

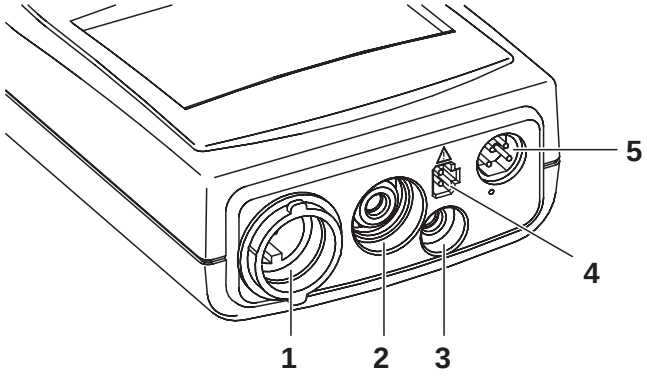

1 Célula conductímetra

2 sonda de medición del pH

3 Sensor térmico pH

4 transformador de alimentación para conexión a la red

5 Interfase serial RS232

Atención
Conecte al instrumento solamente sensores que no eroguen tensiones o corrientes inadmisibles que pudieran deteriorarlo (> SELV y > circuito con limitación de corriente). La mayoría de los sensores - especialmente los sensores de la WTW - cumplen con estos requisitos.

Conexión a la red


Usted puede trabajar con el instrumento conectándolo a la red, o bien independientemente, con pilas. El transformador para la conexión a la red suministra al instrumento de medición el bajo voltaje de alimentación (7,5 V ... 12 V DC). La conexión a la red permite ahorrar pilas.



Atención
El voltaje de la red en el lugar de trabajo debe corresponder al voltaje de entrada del transformador de alimentación original (vea las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS).



Atención
Emplee exclusivamente transformadores de alimentación originales (vea las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS).

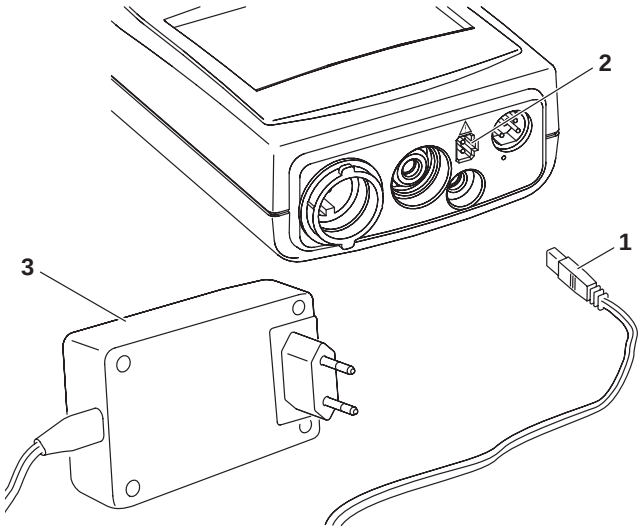

- Introducir el enchufe (1) en el buje (2) del instrumento.
- Enchufar el transformador de alimentación original WTW (3) en un enchufe de la red que sea fácilmente accesible.

Conectar el instrumento


- Presionar la tecla **<** ⏻ **>**.
  En el display aparece brevemente el *test del display*.
  Luego el instrumento cambia automáticamente al modo de medición. El display indica el valor medido actual.

Modo de medición al conectar

Sensor conectado	Modo de medición
Sin sensor o bien, sonda pH, sonda Redox	medición del pH o medición Redox (según el último modo seleccionado)
Célula conductímetra	último modo de medición seleccionado
2 sensores cualesquiera	último modo de medición seleccionado

Medir

Sumario de los modos de medición:

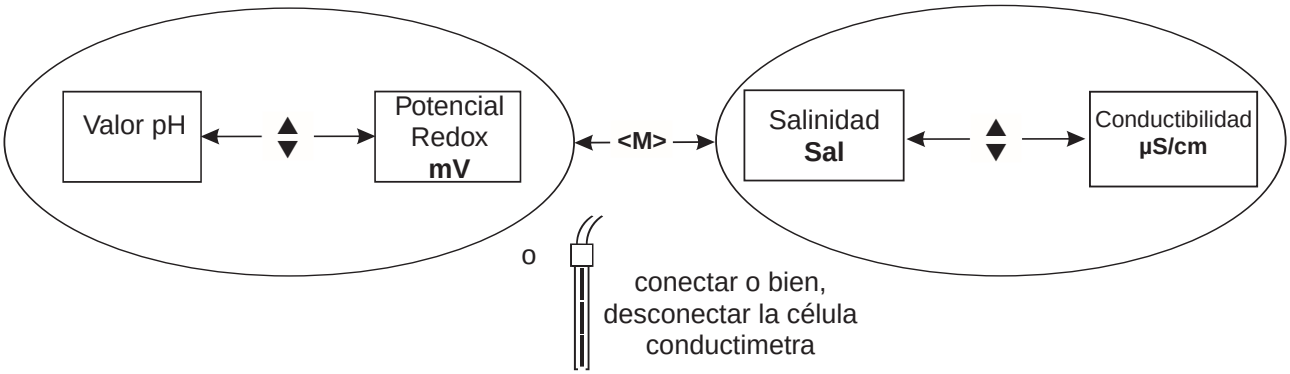

Funciones especiales:

AutoRead (control de deriva)

La función AutoRead verifica la estabilidad de la señal de medición (excepto al medir el potencial Redox). Activar la función AutoRead con **<AR>**. Para iniciar la medición AutoRead, presionar **<RUN/ENTER>**. Durante la medición AutoRead la indicación *AR* parpadea intermitentemente, hasta que la señal medida se estabiliza. La medición con AutoRead puede ser interrumpida en todo momento mediante **<RUN/ENTER>**, siendo registrado el valor actual.

Medición de la temperatura durante mediciones del valor pH

Se pueden efectuar mediciones del valor pH con y sin sensor térmico, asimismo con el sensor térmico de una célula conductímetra. El instrumento reconoce el tipo del sensor empleado y conecta automáticamente al modo correcto para la medición de temperatura (indicación *TP*).
Ingreso manual de la temperatura: Manteniendo oprimida la tecla **<RUN/ENTER>**, ingresar el valor con **<▲> <▼>**.

Selección del rango de medición AutoRange

Se dispone de diferentes rangos de medición para las mediciones de la conductibilidad. La función AutoRange hace que el instrumento cambie automáticamente al siguiente rango de medición en el momento de sobrepasar el rango de medición actual.

Temperatura de referencia de la conductibilidad

La temperatura de referencia puede ser conmutada entre 20 °C y 25 °C. En el display aparece el valor elegido *Tref20* o bien, *Tref25*. Para cambiar a la otra temperatura de referencia, vea CONFIGURACIÓN/PROGRAMACIÓN.

Compensación de la temperatura

Usted puede seleccionar entre las siguientes opciones:

- **Compensación de temperatura no linear (*nLF*)** según EN 27 888
- **Compensación de temperatura linear (*Lin*)** con coeficientes asignables de 0,001 ... 3,000 %/K
- **Sin compensación de temperatura (- - - -)**

Para activar la compensación de temperatura, presionar **<CAL>**, hasta que aparezca *tc*. A continuación, confirmar con **<RUN/ENTER>**. Con **<CAL>** seleccionar la opción deseada. En caso dado asignar el coeficiente de temperatura con **<▲> <▼>**. Con **<M>** volver al modo de medición.

Calibración pH

AutoCal TEC

Es una calibración **de un punto** o **de punto doble**, completamente automática, especialmente adaptada a las soluciones tamponadas técnicas de la WTW. El medidor reconoce automaticamente las soluciones tamponadas. Dependiendo de la configuración, el instrumento indica el valor tampón nominal o el potencial actual del sensor en mV.

Soluciones tamponadas válidas (a 25 °C): 2,00 / 4,01 / 7,00 / 10,01

Observación
Las soluciones tamponadas técnicas de la WTW, TEP 10 Trace y TPL 10 Trace, han sido optimizadas para la calibración con un pH de 10,01. Otras soluciones tamponadas pueden producir errores en la calibración. Las soluciones tamponadas correctas las encuentra Ud. en el catálogo de la WTW, o bien, en el Internet.

AutoCal DIN

Similar a la AutoCal TEC, pero adaptada a las soluciones tamponadas según DIN 19266.

Soluciones tamponadas válidas (a 25 °C): 1,679 / 4,006 / 6,865 / 9,180

ConCal

Es la **calibración de punto doble** con dos soluciones tamponadas (pH 7,0 ± 0,5 y cualquier otra solución tamponada) o bien, una **calibración de un punto** con una solución tamponada cualquiera, como método rápido.

Evaluación de calibración


El instrumento evalúa automáticamente la calibración después que la misma ha sido llevada a cabo. La asimetría y la pendiente son evaluadas por separado. El valor más malo de cada evaluación es indicado en el display.

Indicación	Asimetría [mV]	Pendiente [mV/pH]
	-15 ... +15	-60,5 ... -58
	-20 ... +20	-58 ... -57
	-25 ... +25	-61 ... -60,5 o -57 ... -56
 Limpiar la sonda de medición siguiendo las instrucciones de operación del sensor	-30 ... +30	-62 ... -61 o -56 ... -50
E3 Calibración inadmisible	< -30 o > 30	< -62 o > -50

Observación
Si hay conectada una impresora a la interfase, el instrumento imprime automáticamente un registro de calibración después de haber terminado una calibración válida.

Procedimiento AutoCal TEC / AutoCal DIN:


En el siguiente ejemplo se explica la calibración AutoCal TEC. Durante la calibración AutoCal DIN en el display aparece *Cd...* en lugar de *Ct...*. En lo demás, ambos procedimientos son idénticos.

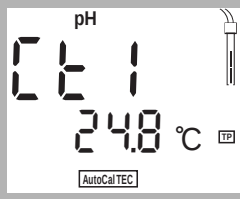

- Conectar la sonda de medición al medidor pH.
  Presionar la tecla **<M>** repetidas veces, hasta que en la indicación del estado actual aparezca *pH* (medición del pH) o bien, *U* (medición del potencial Redox).
- Presionar la tecla **<CAL>** hasta que aparezca la indicación *Ct1* y la función *AutoCal TEC*. El símbolo del sensor indica la evaluación de la última calibración (o bien, ningún símbolo cuando está aún configurado de fábrica o después de haber refijado los parámetros de medición).
- Sumergir la sonda de medición del pH en la primera solución tamponada.
- al medir <u>sin</u> sensor de temperatura:
  Manteniendo oprimida la tecla **<RUN/ENTER>** ingresar la temperatura del la primera solución tamponada con **<▲> <▼>**.



- Presionar **<RUN/ENTER>**. La medición AutoRead comienza. En el display aparece el potencial del sensor de medición (mV) o bien, el valor nominal de la solución tamponada. Cuando el valor medido se estabiliza, aparece *Ct2*.

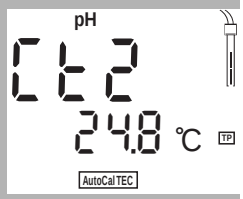

Observación
En este momento se puede cancelar la calibración AutoCal TEC mediante **<M>**. Esto corresponde a una **calibración de un punto**. El instrumento aplica la pendiente Nernst (-59,2 mV/pH a 25 °C) y determina la asimetría de la sonda de medición.


- Para continuar con la **calibración de punto doble** sumergir el sensor de medición del pH en la segunda solución tamponada.
- al medir <u>sin</u> sensor de temperatura:
  Manteniendo oprimida la tecla **<RUN/ENTER>** ingresar la temperatura de la segunda solución tamponada con **<▲> <▼>**.



- Presionar **<RUN/ENTER>**. La medición AutoRead comienza. En el display aparece el potencial del sensor de medición (mV) o bien, el valor nominal de la solución tamponada.




- Cuando el valor medido se estabiliza, el instrumento indica el valor de la pendiente y la evaluación de la calibración.

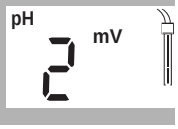


- Presionar **<RUN/ENTER>**. El instrumento indica el valor de la asimetría.
- Con **<M>** cambiar al modo de medición.


Procedimiento ConCal:

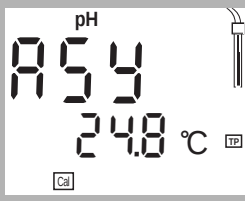

- Conectar la sonda de medición al medidor pH.
  Presionar la tecla **<M>** repetidas veces, hasta que en la indicación del estado actual aparezca *pH* (medición del pH) o bien, *U* (medición del potencial Redox).
- Presionar la tecla <CAL> hasta que aparezca la indicación *Ct1* y la función *AutoCal TEC*. El símbolo del sensor indica la evaluación de la última calibración (o bien, ningún símbolo cuando está aún configurado de fábrica o después de haber refijado los parámetros de medición).
- Sumergir el sensor del pH en la primera solución tamponada (pH 7,0 ± 0,5 en la calibración de punto doble).
- al medir <u>sin</u> sensor de temperatura:
  Manteniendo oprimida la tecla **<RUN/ENTER>** ingresar la temperatura del la primera solución tamponada con **<▲> <▼>**.

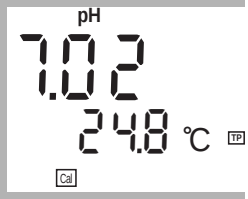


- Presionar la tecla **<RUN/ENTER>**.
  En el display aparece el valor del pH
- Ajustar el valor medido con **<▲> <▼>** al valor pH nominal de la solución tamponada (a la temperatura del momento).
- Si el valor medido es estable, presionar la tecla **<RUN/ENTER>**. En el display aparece el valor de la asimetría.
- Presionar la tecla **<RUN/ENTER>**. Aparece *SLO*.

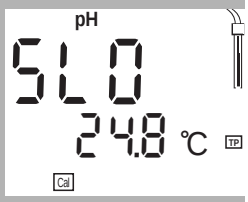


Observación
En este momento se puede cancelar la calibración ConCal mediante **<M>**. Esto corresponde a una **calibración de un punto**. El instrumento aplica la pendiente Nernst (-59,2 mV/pH a 25 °C) y determina la asimetría de la sonda de medición.

- Para continuar con la **calibración de punto doble** sumergir el sensor de medición del pH en la segunda solución tamponada.
- al medir <u>sin</u> sensor de temperatura:
  Manteniendo oprimida la tecla **<RUN/ENTER>** ingresar la temperatura de la segunda solución tamponada con **<▲> <▼>**.

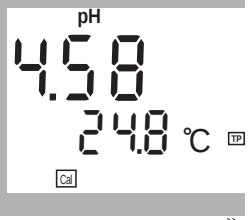

- Presionar **<RUN/ENTER>**.
- Ajustar el valor medido con **<▲> <▼>** al valor pH nominal de la solución tamponada (a la temperatura del momento).

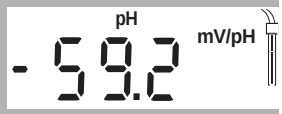

- Si el valor medido es estable, presionar la tecla **<RUN/ENTER>**. El instrumento indica el valor de la pendiente y la evaluación de la calibración.



- Presionar **<RUN/ENTER>**. El instrumento indica el valor de la asimetría.
- Con **<M>** cambiar al modo de medición.

Conductibilidad: Determinar la constante celular

Procedimiento


La constante celular es determinada con el estándar de control 0,01 mol/l KCl.

Evaluación de calibración

Después de la calibración, el instrumento evalúa automáticamente el estado actual de la calibración. El valor de cada evaluación es indicado en el display.

Indicación	Constante celular [cm^{-1}]
	0,450 ... 0,500 cm^{-1}
E3 Calibración inadmisible	fuera del rango de 0,450 ... 0,500 cm^{-1}

Determinar el proceso de la constante celular:

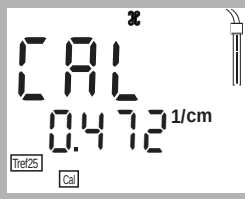


- Conectar la célula conductímetra al instrumento.
  Presionar la tecla **<M>** repetidamente, hasta que en la indicación del estado actual aparezca ℵ (medición de la conductibilidad).
- Presionar la tecla **<CAL>**hasta que aparezca la indicación *CELL*.
- Presionar la tecla **<RUN/ENTER>**. Dependiendo del estado de calibración, aparece la indicación ℵ *CAL* y además:
  – la constante celular actual calibrada (**con** el símbolo del sensor en el display) o bien,
  – la constante celular fija *0,475 1/cm* (**sin** símbolo del sensor en el display). En este caso los parámetros de medición han sido inicializados.

Observación
En este momento se puede cancelar con **<M>**.

- Sumergir la célula conductímetra en la solución de control estándar 0,01 mol/l KCl.



- Presionar **<RUN/ENTER>**. La medición AutoRead comienza.

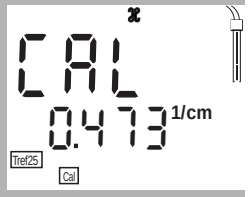

- Cuando el valor medido se estabiliza, el instrumento indica el valor de la constante celular y la evaluación de la calibración. El instrumento archiva en memoria automáticamente el valor de la constante celular.
- Con **<M>** cambiar al modo de medición.

Archivar en memoria

Archivar manualmente en memoria

Encontrándose en el modo de medición, presionar la tecla **<STO>** (indicación *No*. con el número correspondiente a la siguiente posición de almacenamiento libre). A continuación presionar **<RUN/ENTER>** e ingresar el No. de identificación con **<▲> <▼>**. Terminar el archivo en memoria con **<RUN/ENTER>**. El instrumento cambia al modo de medición.

Archivar datos en memoria en forma automática *Int 1*

El instrumento pH/Cond 340i dispone de una memoria interna para archivar los datos. La capacidad de la memoria alcanza para archivar 500 conjuntos de datos. El intervalo de almacenamiento (Int 1) determina el tiempo que transcurre entre dos almacenamientos consecutivos automáticos.
Para asignar el intervalo de almacenamiento, presionar la tecla **<STO>** manteniendo oprimida la tecla **<RUN/ENTER>** (indicación *Int 1*), y para asignar el valor, emplear **<▲> <▼>**. A continuación presionar **<RUN/ENTER>** e ingresar el No. de identificación con **<▲> <▼>**. Con **<RUN/ENTER>** cambiar al modo de medición activado de último. La función para almacenamiento automático está conectada (indicación *Auto Store*).

Llamar los datos archivados en memoria

Con la tecla **<RCL>** se pueden llamar de la memoria los datos archivados. Presionando repetidas veces la tecla **<RCL>** el instrumento le ofrece las siguientes funciones:

StO dISP	Presentar en el display los datos archivados en memoria
StO SEr	Transferir los datos archivado en memoria a la interfase serial
CAL dISP	Presentar en el display los datos de calibración
CAL SEr	Transferir los datos de calibración a la interfase serial

Iniciar la transferencia de datos con **<RUN/ENTER>**.

Transferir datos

Transferir los datos manualmente

Presionar la tecla **<RUN/ENTER>** encontrándose en el modo de medición. De esta manera Ud. puede iniciar en cualquier momento la transmisión de datos hacia la interfase serial de los valores medidos, independientemente de los intervalos asignados.

Transferencia automática de los datos *Int 2*


El intervalo para la transferencia de datos (Int 2) determina el período de tiempo entre dos transferencias consecutivas automáticas de datos. Después que ha transcurrido el intervalo asignado, el conjunto actual de datos es transferido a la interfase. Para asignar el intervalo de tiempo entre dos transferencias automáticas consecutivas **<RCL>**, manteniendo oprimida la tecla, presionar **<RUN/ENTER>** (indicación *Int 2*). A continuación asignar el intervalo con **<▲> <▼>**.


Configurar

Observación
Ud. puede abandonar el menú de configuración en todo momento mediante **<M>**. Los parámetros modificados han sido archivados en memoria.

Proceso de configuración/programación (los valores asignados y/o programados de fábrica aparecen en negrita)**:**



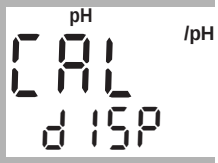

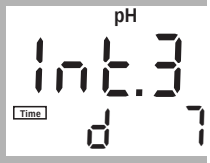







- Desconectar el instrumento
- Manteniendo oprimida la tecla **<M>**, presionar la tecla **< ⏻ >**.
- Fijar la cuota de transmisión (en baud) con **<▲> <▼>**.
  Valores a elección: 1200, 2400, **4800**, 9600 Baud.
- Luego, presionar la tecla **<RUN/ENTER>**.
- Asignar la indicación deseada durante la calibración del pH, mediante **<▲> <▼>**.
  Valores a elección: **Valor nominal de la solución tamponada** (*/pH*) o bien, potencial actual del sensor de medición (*mV*).
- Luego, presionar la tecla **<RUN/ENTER>**.
- Asignar el intervalo de calibración deseado para las mediciones del pH/ del potencial Redox, mediante **<▲> <▼>**.
  Valores a elección: 1... **7**... 999 d.
- Luego, presionar la tecla **<RUN/ENTER>**.
- Asignar el intervalo de calibración deseado para las mediciones de conductibilidad mediante
  <▲> <▼>.
  Valores a elección: 1... **180**... 999 d.
- Luego, presionar la tecla **<RUN/ENTER>**.
- Cambiar la temperatura de referencia para la conductibilidad con **<▲> <▼>**.
  Valores a elección: 25 °C (*Tref25*) y 20 °C (*Tref20*).
- Luego, presionar la tecla **<RUN/ENTER>**.
- Ajustar la fecha y la hora, paso a paso, con **<▲> <▼>**. Confirmar cada ingreso presionando la tecla **<RUN/ENTER>**.
- Al presionar la tecla **<RUN/ENTER>** por última vez, el instrumento cambia al modo de medición que estaba activo de último.

Reajustar al valor inicial (Reset)

Usted puede inicializar por separado los parámetros de medición y la configuración, es decir, puede reajustar los correspondientes parámetros a los valores iniciales de fábrica.

Parámetros de medición

Los siguientes parámetros de medición (pH/ ℋ InI) pueden ser reajustados al valor inicial de fábrica:


pH/Redox (*pH InI*)	
Modo de medición	pH
asimetría	0 mV
Pendiente	-59,16 mV
Conductibilidad (ℋ *InI*)	
Modo de medición	ℋ
Constante celular	0,475 cm^{-1}

Parámetros de configuración

Los siguientes parámetros de configuración (*InI*) pueden ser reajustados al valor inicial de fábrica:

Cuota de transmisión (en baud)	4800
Indicación durante la calibración del pH	Valor nominal de la solución tamponada
Intervalo 1 (archivar en memoria automaticamente)	OFF
Intervalo 2 (para transferencia de datos)	OFF

Reajustar el proceso al valor inicial:

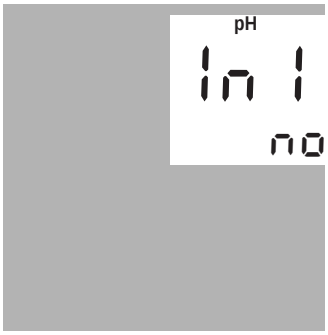

- Manteniendo oprimida la tecla **<RUN/ENTER>**, presionar la tecla **<CAL>**.
- Para reajustar al valor inicial los parámetros de medición, con **<▲> <▼>** seleccionar *YES* y con **<RUN/ENTER>** confirmar, o bien,
- con la tecla **<RUN/ENTER>** continuar, sin modificar el valor, al siguiente parámetro (ℋ *InI* > *InI*).
- Después de los parámetros de configuración *InI* el instrumento cambia al modo de medición que estaba activo de último.

Especificaciones técnicas

Dimensiones y peso

Longitud [mm]	172
Anchura [mm]	80
Altura [mm]	37
Peso [kg]	aprox. 0,3

Diseño mecánico

Tipo de protección	IP 66

Seguridad eléctrica

clase de protección	III

Marqua de Tipificación

cETLus, CE

Condiciones medioambientales

de almacenamiento	- 25 °C ... + 65 °C
de funcionamiento	-10 °C ... + 55 °C
clase climática	2

Rangos de medición pH/Redox

	Rango de medición	**Resolución**
pH	- 2,00 ... + 19,99	0,01
U [mV]	- 1999 ... + 1999	1
T [°C]	- 5,0 ... + 105,0	0,1

Exactitud pH/Redox (± 1 dígito)

pH (después de la calibración)	± 0,01
U [mV]	± 1
T [°C]	± 0,1

Funciones de corrección del pH

Entrar la temperatura	
Manualmente [°C]	- 20 ... + 130

Rangos de medición Cond

	Rango de medición	Resolución
$\mathcal{K}$ [µS/cm]	0 ... 1999	1
$\mathcal{K}$ [mS/cm]	0,00 ... 19,99 0,0 ... 199,9 0 ... 500	0,01 0,1 1
SAL	0,0 ... 70,0 según tabla IOT	0,1
T [°C]	– 5,0 ... + 105,0	0,1

Exactitud Cond (± 1 dígito)

$\mathcal{K}$	Compensación no linear nLF : Exactitud temperatura del medio a medir ± 0,5 % 0 °C ... 35 °C según EN 27 888; ± 0,5 % 35 °C ... 50 °C función nLF ampliada según mediciones de la WTW Compensación linear: Lin Exactitud temperatura del medio a medir ± 0,5 % 10 °C ... 75 °C (el porcentaje de la exactitud se refiere siempre al valor medido!)
SAL	Rango de 0,0 ... 42,0 Exactitud temperatura del medio a medir ± 0,1 5 °C ... 25 °C ± 0,2 25 °C ... 30 °C
T [°C]	± 0,1

Calibración de la constante celular

C [cm^{-1}]	0,450 ... 0,500

Temperatura de referencia Cond

Tref	ajustable entre 20 °C y 25 °C

Interfase serial

Conmutación automática al conectar un ordenador PC o una impresora a través del cable AK 340/B o bien, AK 325/S.

Tipo	RS232, salida de datos
Cuota de transmisión	ajustable entre 1200, 2400, 4800, 9600 Baud
Bits de datos	8
Bit de parada	2
Paridad	sin (none)
Handshake	RTS/CTS + Xon/Xoff
Longitud del cable	max. 15m

Suministro eléctrico

Pilas	4 x 1,5 V pilas alcalinas al manganeso tipo AA
vida útil	aprox. 3000 horas de servicio
Red	Para todos los transformadores de alimentación vale: conexión de sobretensión máxima según categoría II Transformador de alimentación con enchufes europeo, americano, inglés, australiano: FRIWO FW7555M/09, 15.1432 Friwo Part. No. 1822089 Input: 100 ... 240 V ~ / 50 ... 60 Hz / 400 mA Output: 9 V = / 1,5 A

Directivas y normas aplicadas

EMV	Directiva de la Comunidad Europea 89/336/EWG EN 61326 A1:1998 EN 61000-3-2 A14:2000 EN 61000-3-3:1995 FCC Class A
Clase de seguridad del aparato	Directiva de la Comunidad Europea 73/23/EWG EN 61010-1 A2:1995
Clase climática	VDI/VDE 3540
Tipo de protección	EN 60529:1991